
FECHAR

Algoplaque

PENSO HIDROCOLÓIDE ESTÉRIL



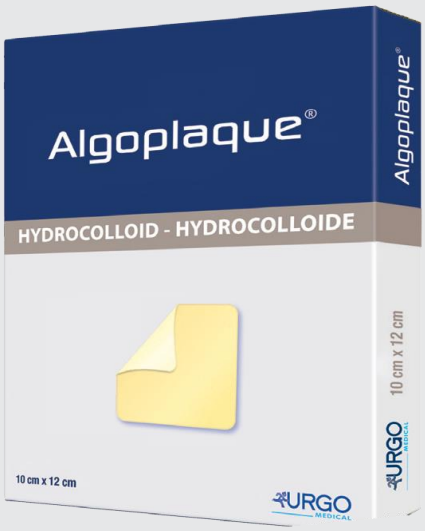

Algoplaque
Sacro

CE 0459

Para o tratamento local de feridas pouco exsudativas

- Cicatrização em ambiente húmido
- Impermeável à água e às bactérias
- Translúcido para observar a evolução da ferida







Algoplaque

Apresentação em blister estéril individual fornecidos em caixas.

Tamanho	U/C	Referência URGO
10x10 cm	16	502881
15x15 cm	10	505845 / 505844
20x20 cm	10	505843
Sacrum 14x16 cm	5	505818
Border 14x14 cm	10	552148

URGO MEDICAL

Algoplaque

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:
Apósito hidrocolóide estéril semipermeável.

- A camada interna é composta por partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose), inseridas numa rede de elastómeros.
- A camada externa, impermeável à água e às bactérias, é um suporte semipermeável de poliuretano.

APRESENTAÇÃO:
Acondicionamento individual estéril.

MODO DE ESTERILIZAÇÃO:
Rádio esterilização.

PROPRIEDADES

- Em contato com a ferida, as partículas hidrocolóides de **Algoplaque®** absorvem progressivamente os exsudados, e incham para formar um gel suave e húmido, favorável ao processo de cicatrização em termos de hidratação, de temperatura e de PH. Este gel não aderente, evita que o tecido de cicatrização seja danificado durante a mudança de apósito.
- A grande flexibilidade e a excelente capacidade adesiva ao perímetro da ferida permitem a **Algoplaque®** adaptar-se aos diferentes formatos anatómicos.
- A transparência do seu suporte permite o controlo permanente da formação e do aspecto do gel.
- Os apósitos da gama **Algoplaque®** são permeáveis ao ar e impermeáveis à água e às bactérias. Estas propriedades permitem tomar banhos e duches, garantem a proteção da ferida face a contaminações exteriores e permitem os intercâmbios gasosos, que favorecem a drenagem dos exsudados.

INDICAÇÕES

- Cuidados locais de úlceras de perna e de úlceras por pressão em estado de granulação.

CONTRA-INDICAÇÂO:
Não utilizar em caso de infecção.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

MODO DE EMPREGO:
1. Preparação da ferida:
- Limpar a ferida segundo as técnicas habituais.
- Secar cuidadosamente com uma compressa estéril, em particular sobre o perímetro da ferida.

2. Aplicação do penso:
- Retirar a película protetora.
- Aplicá-lo sobre a ferida, evitando tocar a face adesiva com os dedos.
- Alisar suavemente o apósito sobre a ferida e mais firmemente na periferia.

3. Renovação do penso:
- No estado de granulação, sobre uma ferida uniformemente limpa, **Algoplaque®** deve ser retirado aquando sua saturação (entre 3 a 4 dias em média, segundo a quantidade de exsudado).
- Para uma remoção indolor, efetuá-la tangencialmente, esticando o suporte paralelamente à ferida.
- Durante a remoção do apósito, o fundo da ulceração cutânea pode estar coberto com uma camada gelatinosa que se elimina facilmente com uma simples lavagem.
- No caso de uma ferida fortemente exsudativa, o fluxo de substância gelatinosa à volta do apósito necessita renovação.

PRECAUÇÕES DE EMPREGO:
- A utilização de Algoplaque® sobre uma ulceração de origem venosa, não dispensa o tratamento compressivo eventualmente prescrito.
- Não utilizar em caso de deterioração do protetor estéril.

ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe IIb.
- Marcado CE.
- Isento de látex

URGO MEDICAL