

# Bodedex® forte

## Agente de limpeza de instrumentos termossensíveis e termorresistentes e de pré-limpeza de endoscópios. Produto patenteado que limpa sem esfregar. Remove suavemente a contaminação persistente, especialmente resíduos de contraste e biofilmes.




### Propriedades do produto

- atua sem esfregar, possuindo um forte efeito de limpeza, mesmo em caso de sujidade persistente
- dissolve resíduos de meios de contraste
- dissolve biofilmes
- pode ser usado em banhos de ultrassons
- reduzida formação de espuma
- sem fragrâncias nem corantes

### Aplicação

Bodedex® forte é um produto para limpeza potente, mas suave para com os materiais, de instrumentos. É particularmente indicado na limpeza de instrumentos médicos termossensíveis e termorresistentes, bem como de equipamento de laboratório. A sua fórmula inovadora remove eficazmente até os resíduos mais resistentes de sangue, proteínas, secreções, gordura, biofilmes e meios de contraste radiológico.

# Bodedex® forte

Bodedex® forte é um detergente para instrumentos adequado para a limpeza de instrumentos médicos termossensíveis e termorresistentes, bom como de equipamento de laboratório. Confiável e ao mesmo tempo suave, o produto remove resíduos persistentes de sangue, proteínas, secreções e gordura. Bodedex® forte apresenta um excelente poder de limpeza na presença de biofilmes. Uma vantagem adicional é a excelente remoção de meios de contraste de raios X. A composição específica do produto Bodedex® forte consegue um efeito superior de limpeza no caso dos meios de contraste particularmente aderentes, comparativamente a agentes de limpeza convencionais.

## Áreas de aplicação

Bodedex® forte pode ser utilizado para a limpeza (sem necessidade de esfregar) de instrumentos e equipamentos em hospitais, nos cuidados primários e em laboratório.

- Remoção de resíduos de meios de contraste

Instrumentos e dispositivos como duodenoscópios, contaminados com resíduos de meios de contraste.

- Anestesia e cuidados intensivos

Artigos utilizados nos doentes tais como tubos faríngeos, máscaras, espátulas de laringoscópio, etc.

- Cirurgia

Instrumentos, equipamentos/instrumentos de cirurgia, aspiradores de sangue, etc.

- Endoscópios

Gastroscópios, duodenoscópios, colonoscópios, broncoscópios, ansas de biópsia e anexos, etc.

- Laboratórios

Recipientes de vidro e de porcelana, dispositivos, tubagens, etc.

- Enfermarias e prática clínica

Dispositivos médicos, recipiente reniforme, grampos, etc.

- Urologia

Endoscópios de luz fria (óticos) e acessórios, retoscópios, etc.

- Instrumentos oftalmológicos

- Instrumentos de medicina dentária

## Instruções de utilização

- Bodedex® forte é um concentrado e deve ser diluído previamente à sua utilização.

- Pré-limpeza

Bodedex® forte é utilizado para a pré-lavagem e lavagem de instrumentos (mesmo dos que têm um lúmen particularmente estreito), de modo a otimizar o sucesso da desinfeção e esterilização subsequentes. Para esta finalidade, os instrumentos devem ser desmontados ou abertos e imersos na solução de Bodedex® forte. Os canais devem ficar cheios, sem quaisquer bolhas. Assegurar-se que os instrumentos são completamente imersos na solução. Após a lavagem, enxaguar todas as partes com água (que deverá ser, no mínimo, potável). Posteriormente, os instrumentos podem ser reprocessados (desinfeção).

- Procedimento de circulação

Bodedex® forte pode ser utilizado em todos os procedimentos comuns de circulação semiautomática.

- Banho de ultrassons

Bodedex® forte pode ser utilizado em todas as tinas de ultrassons de aço inoxidável. Garantir que o tempo de exposição aos ultrassons recomendado pelo fabricante dos instrumentos não é ultrapassado.

- Reprocessamento de endoscópios de termoterapia

Bodedex® forte pode ser usado com segurança antes do reprocessamento de endoscópios para termoterapia química.

## Uso do Bodedex® forte com BODE X-Wipes Safety Pack

Para a pré-limpeza, os endoscópios são limpos diretamente após utilização com um pano embebido numa solução de limpeza.

Uma solução ideal para a pré-limpeza de endoscópios é usar Bodedex® forte com os toalhetes BODE X-Wipes Safety Pack.

Quando usado corretamente,

- haverá toalhetes suficientes, disponíveis a qualquer momento;
- os toalhetes são embebidos numa solução de concentração constante do produto de limpeza;
- uma simples passagem do toalhete é suficiente para a limpeza de um endoscópio;
- a solução de limpeza não é contaminada pela reimersão dos toalhetes.

**Ao usar Bodedex® forte com o sistema BODE X-Wipes Safety Pack, considerar o seguinte:**

- Após períodos longos de não utilização (p. ex.: durante a noite) descartar o primeiro toalhete embebido.
- Fechar bem a tampa, após utilização.
- Passados sete dias após a preparação, deitar fora os toalhetes que ainda se encontram no dispensador e também a solução.

Nota:

- Apenas indicado para a pré-limpeza de endoscópios! Não está indicado para outros tipos de utilização.
- Bodedex® forte é produto para limpeza de instrumentos, por isso, uma única limpeza com um toalhete embebido em solução não esteriliza os instrumentos. Para minimizar o risco de contaminação do exterior, verificar se a tampa se encontra bem fechada e não tocar nos toalhetes desnecessariamente.
- A utilização de Bodedex® com X-Wipes Safety Pack não substitui o reprocessamento adequado dos endoscópios e outros instrumentos adicionais (ver recomendação RKI "Requisitos de higiene para o reprocessamento de dispositivos médicos", Bundesgesundheitsblatt 2012, 55; 1244 – 1310)

## Estabilidade

Sempre que a solução estiver fortemente ou visivelmente contaminada, esta deve ser renovada.
A solução a ser utilizada deve ser renovada, pelo menos, todos os dias.

## Composição


Surfactantes não iónicos e anfotéricos, solventes, agentes complexantes, derivados de aminoácidos, inibidores da corrosão, agentes anti-espuma, conservante.

## Eficácia comprovada

Limpeza: 0.5 % - 1.0 %, tempo de exposição 5 - 10 minutos, dependendo do grau de sujidade.

## Compatibilidade

Devido às excelentes propriedades de limpeza do Bodedex® forte, a combinação com outros produtos não é desejável.

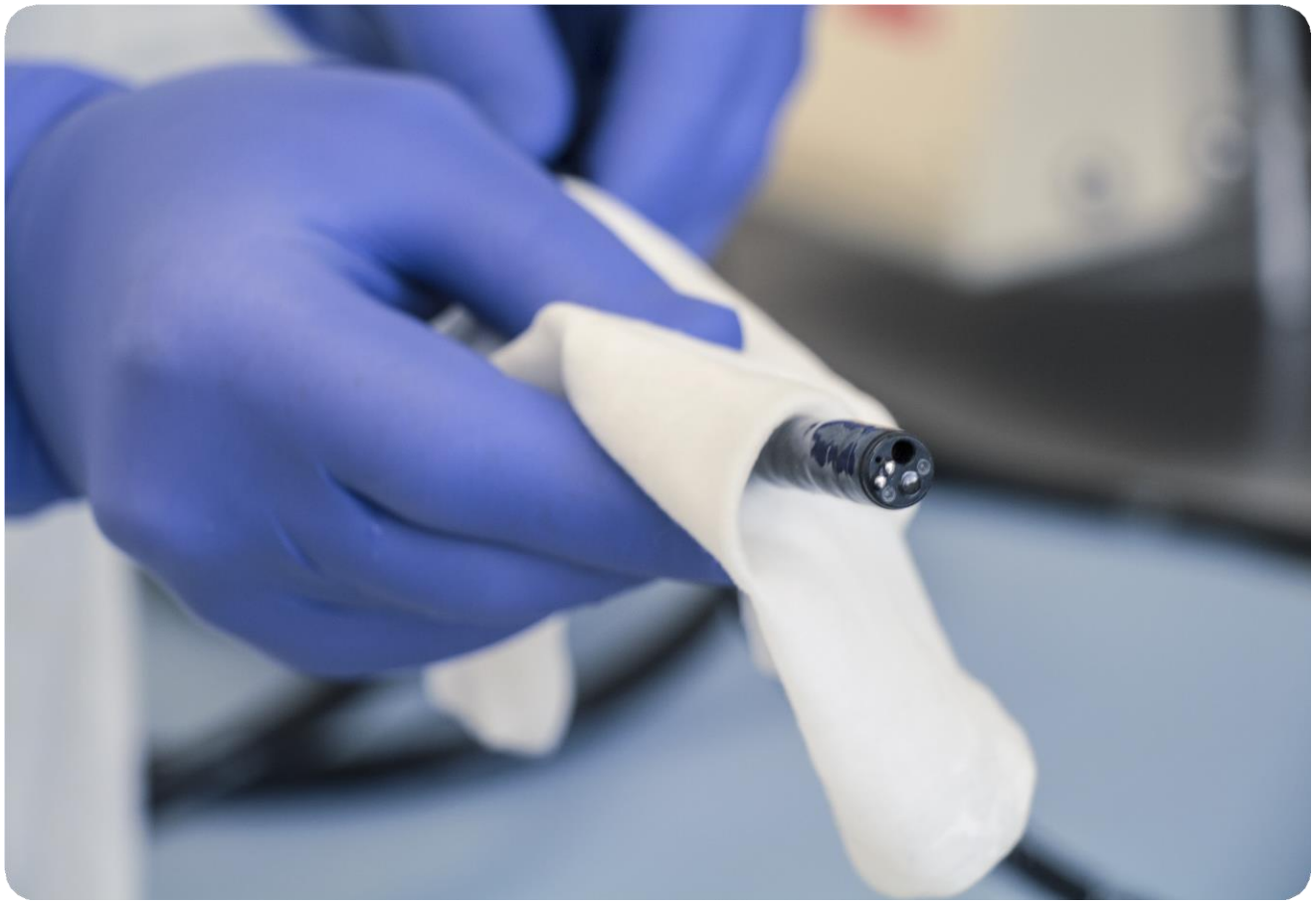

# Bodedex® forte




| Nome do produto | Conteúdo | Referência nº. |
|---|---|---|
| **Bodedex® forte** | 2 L | 980244 |
| | 5 L | 980250 |

**Nota:** A disponibilidade dos produtos Bodedex® forte pode variar nos diferentes países e regiões. Contactar o distribuidor local para mais informações. As recomendações sobre os nossos produtos baseiam-se em testes científicos e são fornecidas de boa-fé. Recomendações mais detalhadas, tais como compatibilidade com os materiais, são apenas possíveis em casos especiais. As nossas recomendações não são obrigatórias nem constituem uma garantia. Não obstam a que o cliente realize os seus próprios testes, tendo em vista os seus objetivos e processos. A este propósito não podemos aceitar qualquer responsabilidade. A nossa responsabilidade está de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento.

CE

*Use os desinfetantes com segurança. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de usar.*

*Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.*

HARTMANN

Helps. Cares. Protects.

Fabricante:
BODE Chemie GmbH
Uma companhia do GRUPO HARTMANN
Tel: +49 40 5 40 06-0 · Fax: -200
info@bode-chemie.de
www.bode-chemie.com

PH 12/2021/Bodedex-forte