KVTECH PORTUGAL, Lda.
Av. Duque de Loule, 106 - Piso 4
1050-093 Lisboa
Portugal
convatec.pt

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONVAMAX™ SUPERABSORVENTE

Penso superabsorvente de poliacrilato sódico

Não Adesivo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CONVAMAX™ Superabsorvente não adesivo é uma gama de pensos estéreis superabsorventes para o tratamento de feridas com exsudado abundante. O penso CONVAMAX™ Superabsorvente não adesivo é composto por uma camada de tecido não tecido resistente à água e permeável ao ar, uma camada formada por um núcleo superabsorvente e uma camada de tecido não tecido como camada de contacto. A estrutura multicamada facilita a gestão do líquido, promovendo um ambiente húmido ideal para um processo de cicatrização mais rápido da ferida.

A película da camada exterior constitui uma barreira resistente à água, antiviral e antibacteriana, que protege a lesão de contaminantes externos e reduz o risco de infeção, desde que o penso permaneça intacto e sem fugas. Além disso, esta película contribui para a gestão da transmissão de vapor de água do exsudado absorvido pelo penso.

Os pensos CONVAMAX™ Superabsorventes absorvem o exsudado até à camada formada por um núcleo que contém polímeros superabsorventes (SAP), que bloqueiam o exsudado e o mantêm afastado da ferida.

Este polímero superabsorvente absorve níveis elevados de exsudado criando um gel coeso, que o retém no interior da estrutura gelificada, mesmo sob compressão.

O penso CONVAMAX™ Superabsorvente não adesivo pode ser utilizado como penso primário ou como penso secundário. Nas situações em que é necessário um penso primário adicional, é possível a combinação com pensos de Tecnologia Hydrofiber®, tais como o AQUACEL® EXTRA™, a fim de proporcionar uma absorção extra e promover um ambiente que favoreça o processo de cicatrização da lesão.

O penso não é recortável, pelo que deverá escolher um penso com um tamanho adequado à lesão. Podem ser usados outros acessórios, como adesivo, ou outros métodos de fixação para garantir a fixação do penso sobre a ferida, bem como ligaduras de compressão ou de retenção, se clinicamente indicado.

O produto encontra-se disponível em embalagens unitárias tipo "chevron", hermeticamente fechadas e esterilizadas com óxido de etileno.

IMAGEM






ESTRUTURA/COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

O penso CONVAMAX™ Superabsorvente não adesivo é um penso estéril constituído por 3 camadas:

- Camada protetora exterior, azul, de **polipropileno**
- Camada com núcleo superabsorvente formado por camadas de **tecido não tecido de celulose, com pó de poliacrilato sódico**
- Camada absorvente conformável de **polipropileno**

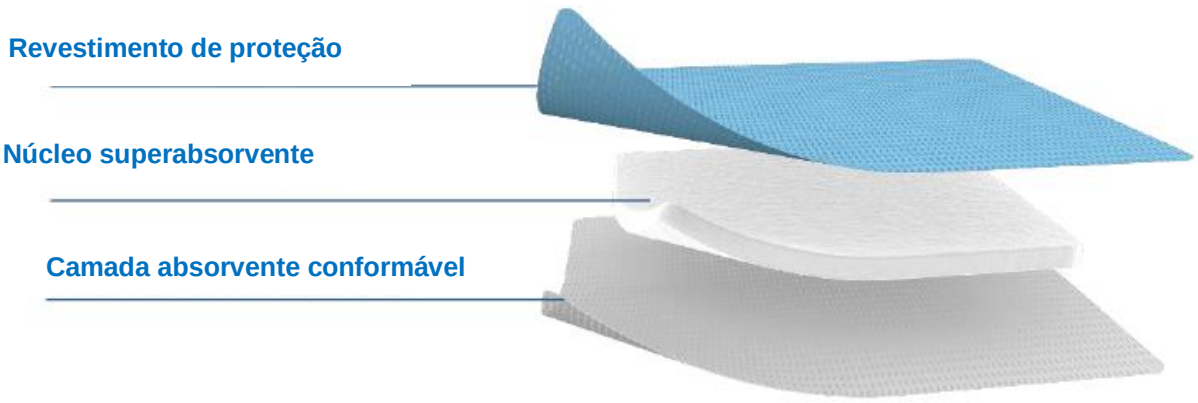

convatec
— forever caring —

- **Camada protetora exterior, azul, de polipropileno**

Esta camada é formada por uma película de polipropileno. Esta é a camada superior do penso e atua como uma camada protetora que: 1) contribui para a evaporação do excesso de humidade; 2) forma uma barreira resistente à água, que protege a lesão de contaminantes externos e reduz o risco de infeção por vírus e bactérias; 3) impede que o exsudado passe para a ligadura ou para a roupa, o que significa que este fica retido no núcleo que contém polímeros superabsorventes (SAP).

- **Camada com núcleo superabsorvente formado por camadas de tecido não tecido de celulose, com pó de poliacrilato sódico**

Esta camada gelifica em contacto com o exsudado da ferida, bloqueando assim o próprio exsudado e os componentes nocivos e reduzindo o risco de maceração da pele perilesional.

- **Camada absorvente conformável de polipropileno**

Esta camada formada por uma película de polipropileno, conduz rapidamente o exsudado até ao núcleo superabsorvente.

Este produto não contém latex, nem ftalatos.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Modulação de protéases

A matriz de metaloproteinases (MMPs) está presente no processo de cicatrização normal de feridas. Em determinadas feridas crónicas, a presença de MMPs pode ser abundante, o que pode dificultar a cicatrização da ferida. *In vitro*, os pensos superabsorventes ConvaMax™ demonstraram não só absorver a MMPs como também bloqueá-la, reduzindo o excesso de MMPs presente no ambiente da ferida e promovendo a sua cicatrização.

CONVAMAX™ oferece uma opção para cada ferida

Pode selecionar o tamanho mais adequado de um leque de opções de fácil aplicação e remoção. CONVAMAX™ permite optar por um penso aderente ou não aderente, dependendo da ferida que se está a tratar.

Absorção de líquido

O exsudado das feridas crónicas pode ser corrosivo para o leito da ferida e para a pele perilesional. Os pensos CONVAMAX™ Superabsorventes absorvem níveis elevados de exsudado (aproximadamente 170g/100 cm^2), retendo-o no núcleo do penso, afastado da ferida.

Retenção de líquido

Uma vez absorvido o exsudado, os pensos CONVAMAX™ Superabsorventes retêm o líquido no núcleo que contém polímeros superabsorventes (SAP), garantindo deste modo que não volte a ser novamente libertado na ferida, na ligadura ou na roupa.

Absorção de líquido sob compressão

Os pensos CONVAMAX™ Superabsorventes podem absorver e reter o líquido sob uma compressão padrão de 40 mm Hg, uma terapia normalmente utilizada, particularmente em feridas dos membros inferiores ou em edemas com exsudado.

Potenciar os benefícios de CONVAMAX™ com a tecnologia Hydrofiber™

Foi demonstrado que os pensos CONVAMAX™ Superabsorventes são eficazes em combinação com os pensos com Tecnologia Hydrofiber™ (como por exemplo Aquacel® Extra™), proporcionando uma absorção extra e promovendo um ambiente benéfico para o processo de cicatrização da ferida.

Resistência à água

Conforme referido anteriormente, a camada protetora de polipropileno impede a saída de exsudado, bem como a penetração de contaminantes externos. Contudo, não se recomenda a sua utilização no duche.

Risco de secagem da ferida

É possível que a ferida seque se os níveis de exsudado forem baixos, ou se a ferida deixar de produzir exsudado durante o processo de cicatrização. Cada mudança de penso deve ser alvo de uma avaliação clínica do estado de evolução da ferida.

Frequência da mudança de penso

CONVAMAX™ deve ser mudado quando clinicamente indicado. O período máximo de utilização recomendado é de até sete dias. Os pensos CONVAMAX™ podem ser substituídos quando clinicamente indicado.

Possibilidade de recortar

Os pensos CONVAMAX™ não são recortáveis.

convatec
— forever caring —

Fixação do penso

Se necessário, a fixação do penso CONVAMAX™ pode ser feita com uma tira de fixação, uma ligadura tubular ou com qualquer outro penso secundário.

Possibilidade de compressão

CONVAMAX™ pode ser utilizado conjuntamente com a terapia de compressão

MECANISMO DE AÇÃO

Os pensos CONVAMAX™ Superabsorventes absorvem o exsudado, através da camada de tecido não tecido em contacto com a pele, até à camada formada por um núcleo que contém polímeros superabsorventes (SAP) que bloqueiam o exsudado, mantendo-o afastado da ferida e ajudando a promover a integridade tecidular.

Este polímero superabsorvente absorve níveis elevados de exsudado criando um gel coeso, que o retém no interior da estrutura gelificada (mesmo sob compressão), mantendo o leito da ferida húmido, o que favorece o processo de cicatrização e, por sua vez, garantindo que o exsudado se mantém afastado da lesão e não passa para a ligadura ou para a roupa.

INDICAÇÕES

A gama de pensos CONVAMAX™ Superabsorvente não adesivos está indicada para o tratamento de feridas com exsudado de moderado a abundante, nomeadamente:

- Feridas mais profundas que requerem um penso primário, como uma úlcera de pé diabético
- Feridas tunelizadas com níveis elevados de exsudado, como penso secundário
- Pele perilesional macerada, quando é necessário que o exsudado seja rapidamente absorvido
- Em áreas onde é mais difícil fixar o penso, como no tronco ou nas pernas (nas situações em que o doente não consegue tolerar uma ligadura), será necessário fixar o penso com uma meia ou com uma ligadura tubular

CONTRA-INDICAÇÕES

- Os pensos CONVAMAX™ Superabsorventes não devem ser utilizados em indivíduos com hipersensibilidade ou com alergia conhecida ao penso ou aos seus componentes.
- Não usar nos olhos, nas membranas mucosas ou em feridas cavitárias, dado que o penso incha durante a absorção
- Hemorragias arteriais ou feridas com hemorragia abundante

PRECAUÇÕES

- Nas feridas em que o nível de exsudado é baixo, ou quando a ferida deixa de produzir exsudado durante o processo de cicatrização, existe o risco de secagem.
- A mudança do penso dever ser feita mediante avaliação clínica e em função da taxa cicatrização de feridas
- O penso não é recortável

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Armazenamento

Armazenar o produto em local fresco e seco, protegido da luz

Validade

O penso CONVAMAX™ Superabsorvente não adesivo tem um período de validade de três anos

Outras Observações

O penso CONVAMAX™ Superabsorvente não adesivo está aprovado para comercialização em toda a Europa com marcação CE, em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE do Conselho que regula os dispositivos médicos a nível europeu.

convatec
— forever caring —

APRESENTAÇÕES

Designação	Dimensões (cm)	Unids /Emb.	REF	CNP	CDM
CONVAMAX™ Superabsorvente Não Adesivo	10X10	10	422567	7249391	74219006
CONVAMAX™ Superabsorvente Não Adesivo	10x20	10	422568	7249409	74219014
CONVAMAX™ Superabsorvente Não Adesivo	15x15	10	422570	7249417	74219111

ConvaTec Limited,
Deeside, UK

®/™ são marcas de ConvaTec, Inc.
©2022

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.
Avenida Duque de Loule, 106 - Piso 4,
1050-093 Lisboa, Portugal
Tel: 707 201 187
email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de
Lisboa

convatec
— forever caring —