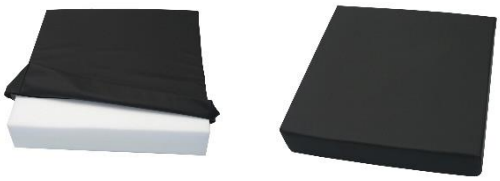
Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Almofada QuadTech Ergo Premium Categoria: Anti escaras Classe: Classe I Referência: GT110054 Linha: Cadeira Cor: Preto Tipo de Artigo: Almofada Tamanho: Único Medida: 42x42x7 Código ISO[1]: ---- NPDM: V0803

FINALIDADE MÉDICA

Indicado para a prevenção de escaras na região sacrococcígea e perineal;
Alívio de dor/pressão sob escaras até Grau II na região sacrococcígea e perineal

Instruções de Uso

O dispositivo deve ser retirado da embalagem e colocado na posição horizontal, na base da cadeira. Não necessita de qualquer ação secundária para o seu funcionamento.

COMPOSIÇÃO

CAPA	Núcleo
100% Poliéster Biopruf®	Espuma Viscoelástica 90Kg/m3

PREVENÇÃO DE DANOS

PERIGO DE CONTAMINAÇÃO

- É recomendado cuidado especial na utilização de seringas, objetos pontiagudos, bisturis ou outros objetos, perto do produto, dado que estes podem rasgar ou perfurar a capa e o núcleo;

- A entrada de fluídos biológicos e a contaminação do produto nestas condições representam perigo para o utilizador;

EVITE

- O uso de jóias, especialmente anéis com pedras, ou com extremidades pontiagudas;

CUIDADOS ESPECIAIS

- Ter atenção ao contacto com o produto durante a utilização de equipamentos médicos tais como acessórios de apoio, placas de transferência, ou outros, de forma a não exercer pressão ou fricção sob a capa/núcleo, para evitar deformações ou rasgões;

- Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas;

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

Inibição de Uso

O produto deve ser imediatamente inutilizado quando:

- São visíveis os seguintes danos ou anomalias na capa: sinais de desgaste, rasgões, furos;

- Ocorrer contaminação do núcleo por fluídos biológicos;

O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção, quer para o utilizador, quer para o cuidador.

Eliminação

Este produto é considerado um resíduo não valorizável.

No final de vida útil deve ser depositado em saco fechado e selado e colocado em contentor municipal.

Eliminação de Produto quando Contaminado

Proceder à eliminação sujeita aos requisitos específicos definidos pela Unidade de Sáude em causa tendo em vista a prevenção de infecções;

* No caso dos utilizadores particulares estes devem contactar qualquer empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos;

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex®
DESIGNED FOR GERIATRICS

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Proibida a exposição solar;
- Não armazenar o produto junto de equipamentos de aquecimento como radiadores, esquentadores, aquecedores;
- Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida;

CUIDADOS NO TRANSPORTE

- Não empilhar o produto na vertical;
- Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida;
- Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas;
- Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DO PRODUTO

Avaliação de integridade da **CAPA**

- Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações;
- Verificar todas as costuras;
- Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos;

Avaliação de integridade do **NÚCLEO**

- Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto;
- Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;

CERTIFICAÇÕES

Núcleo: ISO 845, 2439,1798,3386/1, ASTM D 3574, 1856,3385
Capa: ISO 811, ISO 20743:2013

CONTRA- INDICAÇÕES

Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster.
Não são conhecidos outros efeitos adversos na utilização deste produto.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização, não sendo necessária qualquer ação secundária para a sua utilização.

Instruções de Lavagem



Lavar até 95° | Limpeza a Seco Sem restrições | Não usar lixívia/ branqueadores | Pode ser lava a seco

ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE ATÉ 130°

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.