FICHA TÉCNICA

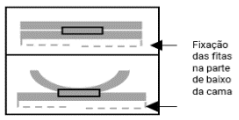
Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Imobilizador Abdominal Categoria: Anti escaras Classe: Classe I Referência: GT180008 Linha: Cama Cor: Azul Tipo de Artigo: Imobilizador Abdominal Ultra - Basic Tamanho: Único Medida: Cinto 121x74 | Abas 89x 74 | Fita Extensível 200 cm Código ISO[1]: ---- NPDM: V0804

FINALIDADE MÉDICA

Restringir os movimentos do utente em camas hospitalares e regulares, assegurando a fixação do mesmo à cama, sem condicionar a sua mobilidade.

Instruções de Uso	
1º O dispositivo deve ser fixado à cama, na parte de baixo, através do cinto de fixação e, após esta ação, abrir a parte superior do dispositivo para o adequado posicionamento do utente. 2º Colocar o utente com a parte superior do cinto aberta e posiciona lo para colocação do cinto à volta da zona do abdómen. 3º Fixar o cinto através das molas que se encontram na extremidade da faixa superior e ajustar através da fita extensível, sem apertar excessivamente (deve conseguir colocar a mão dentro do cinto, quando apertado, para garantir que o dispositivo está corretamente colocado). Peso Máximo Tolerado: 150 Kg	O dispositivo é composto por dois módulos unidos por uma estrutura entrelaçada que permite a dupla fixação (cama/utente)) sem inibir ou condicionar os movimentos. 

COMPOSIÇÃO

30% Poliamida, 30%Polieter, 30%Algodão e 7%Poliéster

PREVENÇÃO DE DANOS

É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluídos e, por conseguinte, a contaminação do enchimento do produto.	- Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.

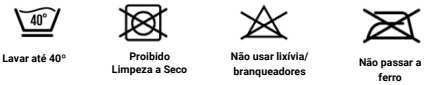
INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

Inibição de Uso	Eliminação
O produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificar: - Danos ou anomalias ao nivel das percintas; -Sinais de contaminação; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção.	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE - Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a equipamentos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	**RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO** - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; - Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES INESCOP - UNE 20344.2004 (R-05036449) Oeko-Tex STANDARD 100 ASTM D76-99	**CONTRA- INDICAÇÕES** Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. Não são conhecidos outros efeitos adversos na utilização deste produto. Caso ocorra algum efeito indesejado, comunique, por favor através do e-mail: qualidade@geritex.pt
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização.	
Instruções de Lavagem  	

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.