Science. Applied to Life.™

Ficha técnica

3M™ Tegaderm™ Roll





Referências: 16002 / 16004 / 16006

DESCRICÃO COMERCIAL

O 3M™ Tegaderm™ Roll não é estéril e consiste numa fina lâmina com um adesivo hipoalergénico livre de látex. O penso é transpirável, permitindo uma boa partilha de oxigeno e de vapor de humidade. É resistente à água e impermeável a líquidos, bactérias e vírus *. Um penso intacto protege a área da poluição exterior. Este produto permite ao utilizador cortar o penso no tamanho desejado.

* Os testes in vitro demonstram que proporciona uma barreira viral para tamanhos de 27 nm de diâmetro (por exemplo, VHC) ou maiores (por exemplo, VHB e VIH) enquanto que o penso permanece intacto sem fugas.

INDICAÇÕES

O 3M™ Tegaderm™ Roll está destinado para o seu uso como um penso secundário (por exemplo, usado em combinação com um penso estéril primário); como uma cobertura protectora sobre a pele intacta ou em risco (por exemplo, úlceras de pressão de fase I, proeminências ósseas quando se está acamado); para fixar dispositivos à pele (por exemplo, dreno e tubo de infusão); e como uma cobertura de fixação impermeável (por exemplo, para proteger dispositivos e curativos primários de fluido externo ou água).

Nota: Este produto não inclui uma instrução para o seu uso no folheto informativo. O Serviço Técnico criou uma brochura proposta para países que podem requerer um prospecto.

CONTRA-INDICAÇÕES

Nenhuma conhecida.

PRECAUÇÕES /ADVERTÊNCIAS


Antes de aplicar o penso deve conseguir-se a hemostasia na zona.

Não esticar o adesivo durante a sua aplicação. Se o adesivo for aplicado com tensão poder-se-ia originar um trauma mecânico na pele.

Antes de aplica o penso, certificar-se que a pele está limpa e seca, livre de resíduos de sabão e de cremes e de forma a prevenir a irritação da pele e garantir uma boa adesão.

Se a zona estiver infetada, este penso apenas se deverá utilizar sob vigilância de um profissional da saúde.

COMPOSICAO

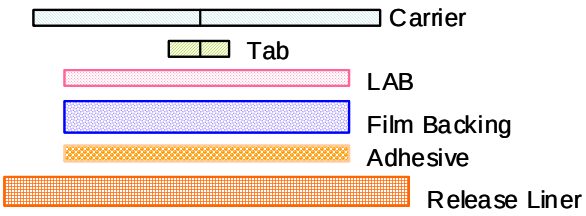

- Suporte de poliéster laminado.
- Suporte de papel de silicone que protege a 100% a superficie.
- Lâmina de poliuretano transparente.
- Revestido na sua totalidade por um adesivo acrílico 100% quimicamente inerte.

ATRIBUTOS E MEDIDAS

Atributos:

- Transparente
- Semipermeável: impermeável à água e aos microorganismos, transpirável ao ar, vapor de água e gases em geral.
- Transpirável: permite o seu uso durante longos períodos sem estragar a pele e com a mínima irritação.
- Hipoalergénico.
- Facilmente adaptável.
- Fácil de manipular inclusive com luvas.
- Alta resistência.
- Alta elasticidade.
- É aplicado por meio de nervuras laterais que evitam a sua aplicação com tensão, a formação de rugas e o contacto das mãos do clínico com o penso.
- Fácil de retirar através da técnica de estiramento que minimiza a dor e danos na pele
- É transparente aos raios X e não deixa resíduos.

Medidas:

Ref.3M	Largura (cm)	Comprimento (m)
16002	5	10
16004	10	10
16006	15	10

EMBALAGEM

Empacotamento: 1 rolo/caixa; 4 caixas/embalagem.

Ref. 3M	Rolos/Caixa	Caixas /embalagem
16002	1	4
16004	1	4
16006	1	4

Etiquetagem: nome comercial, descrição "multi-idioma", medidas, unidades/embalagem, Nº lote, símbolo não contém látex, símbolo de não reutilizar, símbolo não estéril, imagens instruções de uso, marcação CE, código EAN 14, código Datamatrix.

CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar a temperatura ambiente.
- Evitar calor e humidade excessivos.
- A data de validade é indicada na caixa sendo de 2 anos a contar a partir da data de fabrico do produto.

ESTERILIZACAO

Não estéril

CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS

Marcação CE de acordo com a Directiva Europeia 93/42 de Produtos de Saúde.

Fabricante	3M Health Care 2510 Conway Ave. St. Paul, MN 55144 USA
EC REP	3M Deutschland GmbH, Health Care Business Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss, Germany
Classificação	I - não estéril
EC certificate	REG-DOC-05-000008
ISO	ISO 13485:2003 certificado

DADOS PARA ENCOMENDAS

16002:

Tipo de unidade	Unidades contidas	Encomenda mínima
Unidade de consumo	1	4
Caixa	1	4
Embalagem	4	1

16004:

Tipo de unidade	Unidades contidas	Encomenda mínima
Unidade de consumo	1	4
Caixa	1	4
Embalagem	4	1

16006:

Tipo de unidade	Unidades contidas	Encomenda mínima
Unidade de consumo	1	4
Caixa	1	4
Embalagem	4	1

3M España, S.L., Sucursal em Portugal

Cuidado da Saúde
Soluções para o Cuidado da Pele e das Feridas
Rua do Mar da China nº 3 – 3º andar
1990-138 Lisboa