COMPRESSÃO

UrgoK2 Lite Latex free


LIGADURA DE COMPRESSÃO REDUZIDA DUPLA-CAMADA SEM LÁTEX



PRESSURE SYSTEM

Para o tratamento de úlceras venosas ou mistas de perna, edema venoso e linfedema que requerem um nível de compressão reduzido

- Pressão terapêutica reduzida de 20mmHg no tornozelo
- Efeito massagem ao caminhar, melhorando o retorno venoso
- Redução do edema
- Sistema seguro e fácil de aplicar graças aos indicadores de pressão
- Bom nível de conforto, tanto de dia como de noite
- Compressão mantida até 7 dias

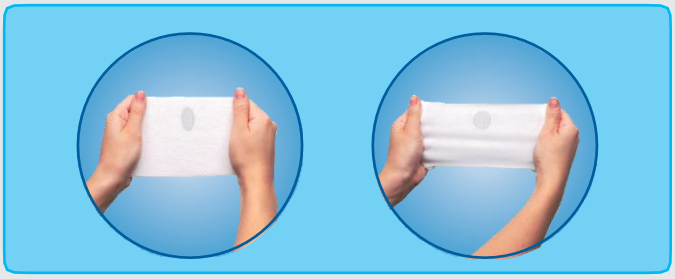

UrgoK2 Lite Latex free

Apresentação em caixa individual com as duas unidades K2.

Tamanho	U/C	Referência URGO
18-25 cm	1	552911
25-32 cm	1	192602

URGO MEDICAL

COMPRESSÃO

UrgoK2 Lite Latex free

DESCRIÇÃO

É uma ligadura bi-camada que combina as vantagens de uma ligadura elástica e uma não elástica aplicando nos seus tratamentos a tecnologia PresSure que se caracteriza por três aspectos básicos de posicionamento, tendo um tamanho e posicionamento específico em função do edema, aplicando a pressão reduzida clinicamente provada pela sua efectividade de 20mmHg .

PROPRIEDADES

UrgoK2 são compostas por dois tipos de ligaduras diferentes com funções claramente diferenciadas:

- **Camada 1:** Ktech Lite: Cor branco, baixa elasticidade, proporciona compressão, proteção e absorção.
- **Composição:** Chumaço: viscosa, poliéster, Tecido: poliamida, elastina.

- **Camada 2:** KPress Látex Free(sem látex): Cor rosa/beje, ligadura elástica, proporciona compressão adicional necessária para alcançar a pressão terapêutica e manter a ligadura na sua posição correta.
- **Composição:** Algodão, poliéster, poliamida, elastina, material sintético, coesiva sem látex.

- Ambas as ligaduras possuem indicadores de pressão.

INDICAÇÕES

- Tratamento de úlceras venosas de perna ou mistas, edema venoso e linfedema, que requerem um nível de compressão reduzido.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Antes de aplicar as ligaduras:
- Examine a forma da perna e identifique as áreas em risco de uma pressão excessiva (como uma prominência óssea).
- Proteger a perna, se necessário, antes da aplicação da ligadura **KTech**. Se tiver uma ferida presente, aplicar um apósito adequado antes de aplicar as ligaduras.
- Medir a circunferência do tornozelo e assegurar a escolha do Kit adequado (perímetro do tornozelo devido ao edema de 18 -25 cm ou 25 -32 cm).
- É preferível aplicar o sistema de compressão à primeira hora da manhã ou depois de ter levantado as pernas do paciente durante uma hora para minimizar o edema ortostático.

Uma vez que a perna esteja ligada, cortar o excesso da ligadura.
- Aplicação «por baixo do joelho» (úlcera venosa da perna ou edema).

Precauções de uso:
- Comprovar que o IPTB >0.6 usando Doppler antes de utilizar o produto.
- Em caso de diabetes, falha cardíaca ou doença microvascular avançada, use o sistema de compressão com supervisão médica adequada.
- Em caso de infecção tratar antes do tratamento com o sistema de compressão.
- Em caso de úlcera de origem rara (vasculites, hemopatía, pioderma gangrenosa,..) o sistema deverá ser utilizado por um especialista.
- A eficácia de **URGOK2 Lite** (ou **URGOK2 Lite Latex Free**) foi testado e validado com a aplicação de **KTECH Lite** e **KPRESS** (ou **KPRESS Látex Free**) juntos.
- **PresSure System** foi especificamente desenhado para a aplicação das ligaduras; é importante seguir as instruções para conseguir a pressão terapêutica adequada.
- Se surgir alguma dificuldade, consulte o seu médico.

Contraindicações:
- Compromisso arterial (com suspeita de doença arterial).
- Pacientes com micro angiopatia diabético, flebites isquêmica (phlegmatia coerulea dolens) trombose séptica).
- Úlceras com infecção.
- Alergia a algum dos componentes.

ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe I.
- Marcado CE.

UrgoK2 Lite Latex Free é indicado para única utilização. Leia as instruções antes de usar o produto.

URGO MEDICAL