Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Linovera®
Solução para prevenção e tratamento de úlceras de pressão de grau I



1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

Linovera® é uma solução indicada para a prevenção e tratamento de úlceras de pressão de grau I.

Composição qualitativa

- Ácidos Gordos Hiperoxigenados:
  - linoléico
  - oleico
  - linolénico
  - palmítico
  - esteárico
  - palmitoléico
  - mirístico
  - gadoléico
  - behénico
  - aráquico
- Vitamina E
- Aloé Vera
- *Centella asiática*
- Perfume (essência de alecrim)

Produto isento de látex

A sua composição confere-lhe ainda, rápida absorção cutânea, o que minimiza desperdício de produto por contacto com o meio envolvente (ex: lençóis, roupa, ...).

A solução apresenta-se em embalagens de 30 ml e 50 ml, munidas de pulverizador, o que permite uma aplicação de forma fácil, localizada e higiénica.

2. MECANISMO DE AÇÃO

Linovera® é uma solução indicada para a prevenção e tratamento de úlceras de pressão de grau I, sendo este efeito conseguido, principalmente, por aplicação tópica de ácidos gordos hiperoxigenados.

Linovera® é um produto destinado à prevenção e tratamento de úlceras de pressão de grau I.

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

O princípio de atuação de **Linovera®** baseia-se na manutenção da hidratação, resistência e elasticidade da pele do doente através da aplicação tópica de ácidos gordos hiperoxigenados, o que contribui para o aumento de resistência face a agentes externos causadores das úlceras de pressão.

A sua composição rica em ácidos gordos hiperoxigenados (alto teor de linoléico) favorece a restauração do filme hidrolipídico, a renovação celular, a restauração da circulação capilar e aumenta a resistência cutânea aos agentes causadores de úlceras de pressão.


O Aloé Vera e a *Centella* Asiática presentes na sua composição, têm um efeito potenciador, melhorando a resistência da pele, reparando a lesão epidérmica, restaurando a circulação capilar e contrariando o efeito dos radicais livres.

Linovera® contém essência de alecrim que lhe proporciona um agradável odor.

3. INDICAÇÕES

Linovera® está indicado na prevenção de úlceras de pressão de grau I.

Principais zonas de risco

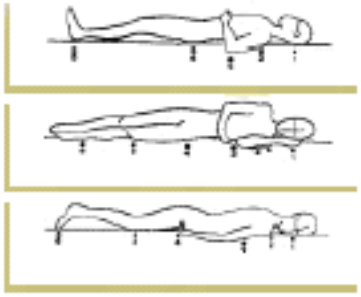

4. CONTRAINDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

A utilização deste produto está contraindicada em pessoas com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos seus componentes.

No entanto, a sua utilização não implica precauções particulares, desde que usado de acordo com as condições normais de utilização preconizadas.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Linovera® destina-se exclusivamente ao uso externo.

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

A ingestão acidental ou intencional de **Linovera®** implica que o doente contacte de imediato um serviço de urgência médica.

Não utilizar no caso de a embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Linovera® não está associado ao aparecimento de efeitos adversos, desde que usado de acordo com as condições normais de utilização preconizadas.

Ler atentamente o ponto anterior "Contraindicações, Precauções e Observações"

6. MODO DE UTILIZAÇÃO



1 - Pulverizar as zonas a tratar (calcanhar, cotovelos, anca, sacro, ...)

2 - Espalhar o produto com as pontas dos dedos, por forma a facilitar a sua total absorção.

3 - Repetir a aplicação de Linovera® 2 a 3 vezes por dia, em todas as zonas de risco.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico: Classe IIa
Organismo Notificado: 0318 - Agencia española de medicamentos y produtos sanitarios
Directiva comunitária: 93/42/CEE

Fabricado por:
B. Braun Medical SA, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubí, Barcelona - Espanha

Distribuído por:
B. Braun Medical, Unipessoal Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

8. ESTERILIDADE

Não aplicável.

9. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM



= Código de lote



= Referência do Produto


= Data Limite de Utilização


= Fabricante


= Advertência



= Marcação CE com identificação do Organismo Notificado


= Marca Ponto Verde


= Consultar instruções de utilização


= Manter longe da luz solar

10. PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

11. APRESENTAÇÃO

Referência	Apresentação
467933	Frasco de 30 ml
450081	Frasco de 50 ml