Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Askina® Sorb
Penso de matriz de Alginato de Cálcio e Carboximetilcelulose

1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

O **Askina® Sorb** é um penso esterilizado, extremamente maleável e adaptável à anatomia da ferida. Possui uma elevada eficácia e está indicado para o tratamento de feridas exsudativas.
Este penso é composto por alginato de cálcio e um hidrocolóide de Carboximetilcelulose (ou CMC).
O princípio activo maioritário é o alginato de cálcio, 85% e o minoritário a carboximetilcelulose 15%

O **Askina® Sorb** absorve o exsudado verticalmente, razão pela qual praticamente todo o penso é utilizado no tratamento da ferida. Consegue-se uma gestão completa do exsudado da ferida não havendo risco de extravasão para os tecidos periféricos. É por isso apenas necessário deixar 2 mm de margem ao redor da ferida.
O **Askina® Sorb** apresenta-se em embalagens individuais de fácil e segura abertura prevenindo qualquer risco de contaminação microbiológica acidental.

O penso **Askina® Sorb** deve ser utilizado em feridas com um nível médio ou elevado de exsudado e em feridas planares ou profundas. O **Askina® Sorb** permite a monitorização da ferida.
Ao efectuar a substituição do penso, o gel existente na ferida deve ser retirado através de uma lavagem suave com uma solução salina estéril 0,9% (soro fisiológico).
Este processo reduz ou elimina qualquer trauma na ferida, tornando assim a troca do penso indolor.

Os pensos de **Askina® Sorb** apresentam-se em embalagens individuais de abertura fácil, isentos de odor.

2. MECANISMO DE ACÇÃO

As fibras de **Askina® Sorb** compostas por alginato/hidrocolóide reagem com o exsudado da ferida formando um gel suave, que absorve o exsudado verticalmente. Este gel proporciona um ambiente húmido, propício aos processos de cicatrização tecidular.
O gel permite a manutenção de trocas gasosas na superfície da ferida, fundamentais para a revascularização da área ulcerada e ao normal processo de cicatrização tecidular, protegendo igualmente contra as possíveis contaminações acidentais.

Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

3. INDICAÇÕES

Askina® Sorb é um penso extremamente absorvente e pode ser aplicado em vários tipos de lesões, com nível de exsudado médio a elevado, mesmo quando em presença de infecção. O penso **Askina® Sorb** pode ser usado na cicatrização de feridas tais como:

- Úlceras de pressão
- Úlceras arteriais
- Úlceras venosas
- Úlceras diabéticas
- Feridas traumáticas

As indicações do produto devem ser ajustadas à evolução da ferida:

EVOLUÇÃO DA FERIDA

É normal que a ferida apresente um aumento de tamanho durante as primeiras utilizações. Esta situação verifica-se sempre que ocorra um desbridamento dos bordos da ferida, o que vai facilitar o processo de cicatrização.

CICATRIZAÇÃO DA FERIDA

Deve-se prosseguir com a utilização de **Askina® Sorb** até a produção de exsudado diminuir substancialmente ou terminar. Nesta altura deverá usar-se um tratamento com um hidrocolóide como seja o **Askina® Hydro** ou um hidrocelular como o **Askina® Transorbent,** e no final do processo de cicatrização o **Askina® Biofilm Transparent.**

FERIDAS NÃO CICATRIZANTES

No tratamento de feridas com nível de exsudado médio ou elevado o uso de **Askina® Sorb** facilita a criação de um ambiente favorável à cicatrização.
No entanto existem feridas nas quais não se verifica o aparecimento de um processo de cicatrização devido a causas secundárias.

Nestas circunstâncias torna-se necessário utilizar um tratamento adicional e complementar à utilização de **Askina® Sorb** adequado à resolução dos factores que provocam a não cicatrização. Se após 4 a 6 semanas de utilização de **Askina® Sorb** não se verificarem melhoras, o diagnóstico inicial e a terapia deverão ser reavaliados.

Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

4. CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

O emprego de **Askina® Sorb** terá poucos benefícios quando aplicado em feridas muito secas ou necrosadas.
Askina® Sorb não deve ser utilizado em implantações cirúrgicas de tratamento de queimaduras de 3º grau.
É pouco apropriada a utilização de **Askina® Sorb**, em feridas com baixo nível de exsudado, mas apesar disso pode alcançar-se uma cicatrização satisfatória.
Tal como para outros pensos absorventes, pode ocorrer de forma esporádica uma sensação suave e passageira de "repuxar" após aplicação. A limpeza da ferida com uma solução salina estéril 0,9% imediatamente antes da aplicação de **Askina® Sorb**, reduzirá esse desconforto.

O uso simultâneo de agentes tópicos, tais como antissépticos e antibióticos com **Askina® Sorb** não é aconselhado, porque alguns destes agentes podem provocar interacções. Assim, o seu uso concomitante com **Askina® Sorb** pode reduzir ou anular os seus efeitos.

Askina® Sorb não está contra indicado para feridas infectadas, mas nestes casos deverá existir um tratamento médico apropriado.

O tratamento com **Askina® Sorb** deve ser feito sob vigilância de um profissional de saúde. Quando existe infecção anaeróbica na ferida, não é recomendado que se efectue um tratamento secundário oclusivo.

Não utilizar no caso da embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Não existem efeitos adversos conhecidos associados ao uso de **Askina® Sorb**.

Recomenda-se a leitura atenta da alínea anterior.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

Recomenda-se que **Askina® Sorb** seja usado sob supervisão de um profissional de saúde, tendo em atenção as técnicas de assepsia.
Askina® Sorb é muito fácil de aplicar, não requerendo técnica ou equipamento especializados.
A troca do penso normalmente efectua-se quando a área de **Askina® Sorb** que cobre a ferida está completamente gelificada.

Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)


Por esta razão o intervalo entre as trocas do penso depende exclusivamente do estado da ferida e do nível do exsudado.
As feridas com elevado nível de exsudado podem requerer inicialmente a troca diária do penso, mas poderá ser reduzido para duas vezes por semana de acordo com o processo evolutivo da cicatrização.

PRIMEIRA APLICAÇÃO DO PENSO de Askina® Sorb



a) Lave a ferida com uma solução salina estéril 0,9% (soro fisiológico) ou solução de Prontosan®para a preparação do leito da ferida.
b) Seque a pele que circunda a ferida.
c) Seleccione o penso de **Askina® Sorb** mais apropriado que cubra completamente a superfície da ferida.
d) Aplique **Askina® Sorb** directamente sobre a superfície da ferida, deixando no mínimo 2 mm ao redor da mesma.
e) No caso de úlceras venosas localizadas nas pernas, pode ser utilizado simultaneamente um tratamento de compressão de acordo com a prescrição médica.
f) Aplique um penso secundário como o **Askina® Biofim Transparent**.

SUBSTITUIÇÃO DO PENSO

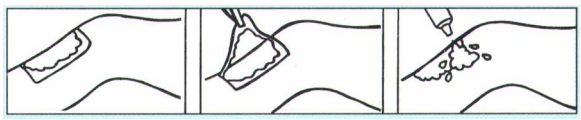

Askina® Sorb é fácil de retirar. Este facto torna-o confortável e atraumático, ajudando a proteger o processo de cicatrização.

a) Retire o penso secundário.
b) Irrigue a ferida, lave e remova o gel com uma solução salina estéril 0,9% (soro fisiológico), depois siga os procedimentos b) a e) da alínea anterior. Este processo reduz ou elimina qualquer trauma sobre o leito da ferida e torna indolor, o processo de troca de penso.

Periodicidade da Mudança do Penso

A troca do penso normalmente efectua-se quando a área de **Askina® Sorb** que cobre a ferida está completamente gelificada.

Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Por esta razão o intervalo entre as trocas do penso depende exclusivamente do estado da ferida e do nível do exsudado.
As feridas com elevado nível de exsudado podem requerer inicialmente a troca diária do penso, mas poderá ser reduzido para duas vezes por semana de acordo com o processo evolutivo da cicatrização.
Em feridas infectadas as trocas de penso devem ser no mínimo diárias.
O penso não deverá permanecer colocado por mais de sete dias.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico: Classe IIb
Organismo notificado: NSAI - National Standards Authority Ireland (0050)
Directiva comunitária: 93/42/CEE

Fabricado por:
B. Braun Hospicare Ltd., Collooney, Co. Sligo – Irlanda

Distribuído por:
B. Braun Medical, Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

8. ESTERILIDADE

Produto esterilizado através de radiação gama.

9. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM

Evitar a exposição à luz solar directa ().

Armazenar à temperatura e humidade ambientes ().

LOT = Código de lote

REF = Referencia do Produto

Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

 = Atenção, consultar documentos inclusos

 = Utilizar até

 = Fabricante

 = Não reutilizar



= Esterilizado por radiação gama



= Marcação CE com identificação do Organismo Notificado

Estéril até a embalagem ser aberta ou danificada.

10. PRAZO DE VALIDADE

5 anos.

11. APRESENTAÇÃO

Referência	Medida	Unidade de Venda
2100S	6 x 6 cm	Caixa de 15 unidades
2101S	10 x 10 cm	Caixa de 15 unidades
2102S	15 x 15 cm	Caixa de 10 unidades