ai168864580762_Pocket Flyer Suturas PT_julho 2022.pdf 1 06/07/2023 13:16

NOMENCLATURA AGULHAS B. BRAUN

A		B		C		12	D	
Ângulo de curvatura da agulha		**Tipo de corpo**		**Tipo de ponta**		**Comprimento da agulha**	**Observação**	
S	1/8 de círculo	R	Corpo cilíndrico	T	Ponta trocante	Refere-se à distância entre a ponta da agulha e o fim da agulha, medida ao longo do comprimento da mesma, em mm.	fff	corpo da agulha extra fino
V	1/4 de círculo	S	Lanceolado	N	Ponta romba		f	corpo da agulha fino
D	3/8 de círculo	G	Trapezoidal micro gravado	S	Ponta de esterno		s	corpo da agulha reforçado
H	1/2 de círculo	L	Espatulado	C	Ponta cortante		ss	corpo da agulha extra reforçado
F	5/8 de círculo			M	Micro-ponta		v	agulha break-off
G	Reta			MP	Ponta de precisão		b	agulha negra
P	Curva progressiva			m	Micro agulha			
J	Anzol			mV	Ponta cilíndrico (vascular)			
SK	Agulha ski			B	Ponta de proteção			

Exemplo:

H	R	C	26	b
HRC 26b → 1/2 de círculo, corpo da agulha cilíndrico com ponta cortante, 26 mm de comprimento, negra.				

Ângulo de curvatura da agulha

S 1/8 círculo
V 1/4 círculo
D 3/8 círculo
H 1/2 círculo
F 5/8 círculo



Outras

Anzol



Progressiva



Reta

SK Ski

Agulhas Take-off

Para retirar a agulha da sutura sem o auxílio da tesoura após a sutura ter sido efectuada e segurar a agulha com o porta-agulhas. Com um puxão direto do porta-agulhas, a agulha pode ser removida do fio de sutura.

MANUSEIO PASSO-A-PASSO

EMBALAGEM DE DISPERSÃO DIRETA (DDP – DIRECT DISPENSE PACKAGING)



Abra a embalagem exterior que não se encontra estéril



Abra-a para o profissional de saúde que se encontra desinfetado



Abra a embalagem estéril no sentido das setas indicadas a cores



Retire a sutura segurando a agulha diretamente com o porta-agulhas.

RacePack® – SISTEMA INOVADOR DE EMBALAGEM DE SUTURAS DA B. BRAUN



Abra a embalagem exterior, não estéril
- Ampla área estéril exposta para melhor preensão.



Transferir a embalagem RacePack® para o profissional de saúde desinfetado que se encontra no campo estéril.

RacePack®, ® reduz o efeito de memória
- Uma redução de 40%comparada com as embalagens standard no mercado (1)



Retire a agulha diretamente da embalagem segurando-a com o porta-agulhas
- As abas presentes na embalagem permitem uma preensão da agulha



Retire a sutura

(1) Data on file PTR/02/FF/0608/JLT-K; issue date: 13/09/2007 and PTR/02/FF/0608-E/JLT-BC; issue date: 16/02/2009

VANTAGENS DA EMBALAGEM RacePack® COMPARADA COM A DDP



RacePack® é um sistema de embalamento num só passo que providencia (2):
- Redução do efeito de memória da sutura.
- Redução de possíveis defeitos indesejáveis na sutura, como dobras ou marcas.
- Melhoria do acesso às agulhas.
- Melhoria da extração da sutura.
- Melhoria da visualização da descrição do produto.

(2) Data on file RDR/02/FF/1511/JLT-A; issue date:18/06/15

AESCULAP® – uma marca B. Braun

B. Braun Medical, Unipessoal Lda
Est. Consigliери Pedroso 80 | Queluz Baixo | 2730-053 Barcarena | Tel. 214 368 242
www.bbraun.pt | julho 2022

AESXXMAR22

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



GUIA DE SUTURAS

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

ai168864580762_Pocket Flyer Suturas PT_julho 2022.pdf 2 06/07/2023 13:16

GAMA COMPLETA DE SUTURAS

SUTURAS ABSORVÍVEIS

	Monofilamento				Multifilamento		
	Monosyn® Quick	Monosyn®	MonoPlus®	Monomax®	Novosyn® Quick	Novosyn®	Novosyn® CHD
							
	Gliconato, curto perfil de absorção	Gliconato, médio perfil de absorção	Polidiaxanona, longo perfil de absorção	Poli-4-hidroxibutirato, extra longo perfil de absorção	Poliglactina 910, curto perfil de absorção	Poliglactina 910, médio perfil de absorção	Poliglactina 910, médio perfil de absorção
Revestimento	Nenhum				Poliglactina 370, estearato de cálcio		Poliglactina 370, estearato de cálcio, diacetato de clorohexidina
UPS (métrico)	6/0 a 1 (0.7 a 4)	7/0 a 2 (0.5 a 5)		2/0 a 1 (2 a 4)	6/0 a 2 (0.7 a 5)	8/0 a 2 (0.4 a 5)	5/0 a 2 (1 a 5)
Retenção da força tensil	1 Dia ≈100% 6-7 Dias ≈ 50% 10 Dias ≈ 20-30%	1 Dia ≈100% 14 Dias ≈ 50% 21 Dias ≈ 20%	1 Dia ≈100% 14 Dias ≈ 90% 28 Dias ≈ 50%	**USP 2/0:** 1 Mês ≈ 90% 3 Meses ≈ 60% 5 Meses <25% 7 Meses ≈ 0% **USP 1, 0:** 1 Mês ≈ 90% 3 Meses ≈ 70% 5 Meses ≈ 65% 7 Meses ≈ 50%	1 Dia ≈ 100% 5 Dias ≈ 50% após 14 Dias ≈ 0%	1 Dia ≈100% 14 Dias ≈ 75% 21 Dias ≈ 40-50% 28 Dias ≈ 25%	1 Dia ≈100% 14 Dias ≈ 75% 21 Dias ≈ 40-50% 28 Dias ≈ 25%
Absorção de massa	Após 56 dias	De 60 a 90 dias	De 180 a 210 dias		Em aprox. 42 dias	De 56 a 70 dias	

GAMA COMPLETA DE SUTURAS

SUTURAS NÃO-ABSORVÍVEIS

	Monofilamento	Multifilamento	Monofilamento ou Multifilamento	Monofilamento	Pseudomonofilamento	Multifilamento	
	Optilene®	PremiCron®	Steelex®	Dafilon®	Supramid	Dagrofil®	Silkam®
							
	Polipropileno e polietileno, não absorvível	Poliéster, não absorvível	Aço inoxidável, não absorvível	Poliamida, não absorvível		Poliéster, não absorvível	Seda natural, não absorvível
Revestimento	Nenhum	Silicone	Nenhum ou polietileno [3]	Nenhum			Cera
UPS (métrico)	10/0 a 2 (0.2 a 5)	6/0 a 5 (0.7 a 7)	[1] Steelex 5/0 a 7 (1 a 9) [2] Steelex Sternum Set 1 a 7 (4 a 9) [3] Steelex Electrode Set 3/0 a 0 (2 a 3.5)	11/0 a 3 (0.1 a 6)	6/0 a 3 (0.7 a 6)	6/0 a 8 (0.7 a 10)	8/0 a 6 (0.4 a 8)




Cirurgia Cardiotorácica
- Optilene®
- PremiCron®




Saúde da Parede Abdominal
- Monomax®



Cirúrgia Plástica Reconstrutiva
- Monosyn®
- Monosyn® Quick
- Dafilon®

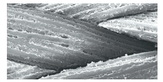

Multifilamento

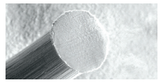

Monofilamento

INFORMAÇÃO DA CAIXA E CARTEIRAS

	Descrição
1	Código da agulha
2	Descrição da sutura
3	Nome do produto
4	Comprimento da sutura / Cor
5	Tamanho USP e EP
6	Código de lote
7	Data de validade (ano/mês)
8	Atenção, Instruções de uso
9	Não reutilizar
10	Número do artigo
11	Método de esterilização
12	Número de unidades*

* Caixas disponíveis com as seguintes quantidades:
M=6 unidades , G=12 unidades, B=24 unidades, C=36 unidades

