FICHA TÉCNICA

b.ativ superabsorb

PENSO SUPERABSORVENTE

by care
innovating for
a better care

www.by-care.pt

DESCRIÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIA	DIMENSÕES
7011280	10 X 10 CM
7011282	20 X 15 CM
7011283	20 X 20 CM
7011284	20 X 10 CM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O penso superabsorvente é um penso estéril para utilização em feridas altamente exsudativas, composto por uma camada de tecido não tecido respirável e impermeável, uma camada almofadada superabsorvente e uma camada de tecido não tecido hidro penetrante não aderente. A construção em várias camadas facilita a gestão de fluidos para fornecer o ambiente húmido ideal da ferida, o que leva à promoção de uma cicatrização mais rápida. A camada almofadada superabsorvente proporciona uma absorção superior e retém o exsudato, o que minimiza o risco de maceração e danos na pele ao redor da ferida.



CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Os pensos superabsorventes são indicados para o tratamento de feridas com exsudato moderado a elevado, incluindo:

- úlceras da perna;
- úlceras de pressão;
- úlceras do pé diabético;
- feridas cirúrgicas abertas.

Pode ser utilizado sob terapia compressiva.

CARATERISTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

- Película protetora: Tecido não tecido
- Camada almofadada superabsorvente: Poliacrilato, Celulose, Polipropileno, Polietileno
- Camada de tecido não tecido hidro penetrante não aderente


...OUTRAS CARATERÍSTICAS

- Elevada absorção, sem extravasamento
- Confortável, utilização fácil
- Impermeável à agua e bactérias e com alta permeabilidade ao ar
- Remoção atraumática, numa só peça, sem deixar resíduos
- Isento de látex
- Hipoalergénico
- Livre de partículas tóxicas e contaminantes

PROPRIEDADES

- Força de selagem: ≥3.0N/15mm
- Valor de pH: 5.0-9.0

TESTES	MÉTODO	RESULTADO
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO LIVRE	EN 13726:2023	183,42 g/100cm2
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SOB PRESSÃO 40mmHg	EN 13726:2023	83,36 g/100cm2
CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE FLUIDO	EN 13726:2023	158,90 g/100cm2

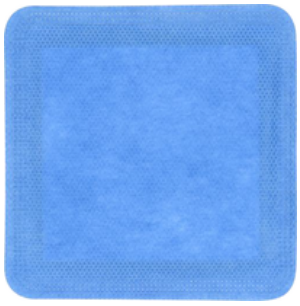



PRAZO DE VALIDADE

3 ANOS

CLASSIFICAÇÃO CE

Classe IIb

ESTÉRIL/NÃO ESTÉRIL

ESTÉRIL

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO

ÓXIDO DE ETILENO

ENQUADRAMENTO LEGAL

O produto está conformidade com os requisitos legais da Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42/EEC - Classe IIb.

Simbologia utilizada:



Cumpre com a norma ISO 13726:2023 - Métodos de ensaio para pensos primários para feridas.

INSTRUÇÕES DE USO

1) Depois da ferida estar limpa e esterilizada, é selecionado o penso de tamanho adequado para a borda da ferida.
2)Aplicar o penso diretamente na ferida.
3) Fixar o penso com outro penso secundário.

Frequência de mudança:
A frequência de mudança do penso vai depender da quantidade de exsudato.

Remoção do penso:
Remoção atraumática. Caso as características da ferida modifiquem, como a diminuição de exsudado, a remoção pode ser facilitada se for humedecido com solução salina.

APRESENTAÇÃO LOGÍSTICA

REF.	EMBALAGEM INDIVID UAL	CAIXA DISPENSADORA	CARTÃO
7011280	1	10	100
7011282	1	10	100
7011283	1	10	100
7011284	1	10	100

O PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO À TEMPERATURA AMBIENTE, EM LOCAL SECO E FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ SOLAR

ADVERTÊNCIAS

1. Não utilizar este produto em feridas secas ou pouco exsudativas, olhos, membranas mucosas ou em fístulas porque o penso aumenta de volume durante a absorção. Não utilizar em queimaduras de 3º grau.
2. O penso não deve ser utilizado em pessoas com alergia conhecida ou hipersensibilidade ao penso ou aos seus componentes.
3. Não reutilizar. Não utilizar o penso se a embalagem estéril estiver aberta ou danificada.
4. Não cortar o penso, a cobertura deverá permanecer intacta.



Distribuidor: By Care, Lda

Fabricante: Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd