FICHA TÉCNICA

FABRICANTE:
Brightwake Limited, Also trading as Advancis
Sidings Road, Lowmoor Business Park,
Kirkby-in-Ashfield, Nottingham, NG17 7JZ, United Kingdom

DISTRIBUIDOR exclusivo em Portugal**:**
Queenlabs – Especialidades Farmacêuticas, Lda.
Rua General Firmino Miguel, Nº 5, 10-B
1600-100 Lisboa

NOME COMERCIAL:



ADVAZORB®
Sem rebordo

CLASSE DE RISCO DM:	MARCAÇÃO CE:	ORGANISMO NOTIFICADO:
IIb	Sim	1936

COMPOSIÇÃO:

Penso estéril de poliuretano (PU), sem rebordo adesivo, constituído por 2 camadas:

- Camada externa de poliuretano/filme semipermeável: impermeável às bactérias e permeável às trocas gasosas;
- Camada de interface de PU absorvente (espuma hidrofílica) de baixa aderência.

Isento de látex, hipoalergénico, livre de partículas tóxicas e contaminantes.

EMBALAGEM PRIMÁRIA:
Cada penso é embalado individualmente e o penso permanece estéril até à abertura da embalagem primária ou até ao fim do prazo de validade. O penso é esterilizado por óxido de etileno.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:
A unidade mínima de venda é igual à quantidade de pensos contida dentro de uma embalagem secundária (10 pensos) acompanhados com o folheto informativo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Advazorb® é um penso de poliuretano suave, maleável e com baixa aderência, com capacidade de absorção e retenção de exsudado, utilizado para gerir exsudados ligeiros a moderados.

Possui uma camada exterior de PU que impede o repassamento do exsudado, protege a ferida e é impermeável a bactérias, evitando a contaminação cruzada.

Com uma elevada Taxa de Transmissão de Vapor de Água (*2600-2700 g/m^2/24h*), o penso Advazorb® é permeável às trocas gasosas, permite a respiração da pele e mantém húmido o leito da ferida, pelo que fornece as condições ideais para a evolução do processo de cicatrização.

PROPRIEDADES:

Espuma hidrófilica de poliuretano
Boa capacidade de absorção de exsudado. Absorção vertical.

Capacidade de absorção moderada
Capacidade de absorver desde níveis baixos a moderados de exsudado.

Elevada capacidade de retenção
Retém o exsudado absorvido, impedindo que o mesmo retorne ao leito da ferida.

Mantém o ambiente húmido
Ajuda a manter o ambiente húmido no leito da ferida, necessário à cicatrização.

Permeável às trocas gasosas
Devido a uma elevada Taxa de Transmissão de Vapor de Água de 2600-2700 g/m^2/24 horas, deixa a ferida respirar.

Impermeável a bactérias
Impede a entrada de bactérias no leito da ferida.

Parte superior de reduzido atrito
O penso desliza facilmente sob as fibras dos tecidos, com os movimentos do doente e o contacto com a roupa, sem provocar atritos, evitando o deslocamento do penso do local desejado.

Macio e confortável
Espuma de PU de elevada qualidade, suave, macia e confortável para o doente.


MODO DE APLICAÇÃO:

Limpe a ferida de acordo com os procedimentos habituais preconizados.

Escolha um penso com o tamanho e forma adequados às dimensões da ferida. Advasorb® pode ser cortado para de adaptar aos contornos da ferida.

Aplique o penso com o lado da espuma diretamente sobre o leito da ferida e com uma sobreposição de 2cm dos bordos da ferida.

Fixe o penso no local da forma mais apropriada, com adesivo, ligadura ou um penso secundário adequado.

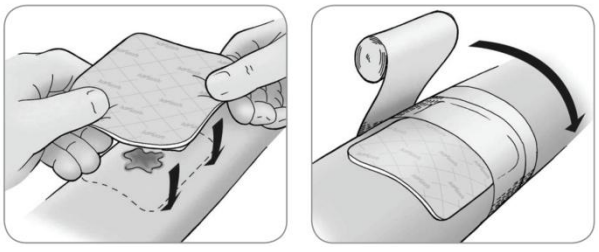

QUANDO SUBSTITUIR:

Advasorb® deve ser mudado até 7 dias ou quando alcançar a sua capacidade máxima de absorção (quando o exsudado for visível a 2 cm do rebordo da espuma). O que ocorrer primeiro.

INDICAÇÕES:

Advazorb® é adequado para uma ampla variedade **de feridas exsudativas agudas e crónicas**, incluindo:

- Úlceras por pressão
- Úlceras de perna
- Úlceras diabéticas
- Feridas cirúrgicas
- Queimaduras superficiais
- Feridas traumáticas (Cortes/abrasões)
- Proteção de proeminências ósseas
- Em combinação com terapia compressiva (pode ser utilizado até 40 mmHg, nível máximo recomendado. A escolha cabe ao profissional de saúde, considerando o nível de exsudato, a duração da compressão e o histórico médico do doente).

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não aplicar em feridas com hemorragia abundante e hemorragia arterial.
Não use o penso se tiver sensibilidade conhecida ao poliuretano.

ADVERTÊNCIAS:

Se aparecer vermelhidão ou sensibilização interrompa o seu uso.

CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente, em local fresco e seco, ao abrigo do calor, da humidade e da luz direta.

APRESENTAÇÕES:

Medida	Qtd/Emb	REF	ID (Reg.Infarmed)	NPDM	CDM
ADVAZORB®	(sem rebordo adesivo)				
5 cm x 5 cm	10 pensos	CR4221	77312	M04040601	14901846
7,5 cm x 7,5 cm	10 pensos	CR4165	77312	M04040601	14901854
10 cm x 10 cm	10 pensos	CR4166	77312	M04040601	14901838
12,5 cm x 12,5 cm	10 pensos	CR4167	77312	M04040601	14901862
15 cm x 15 cm	10 pensos	CR4168	77312	M04040601	14901870
10 cm x 20 cm	10 pensos	CR4169	77312	M04040601	14901811
20 cm x 20 cm	10 pensos	CR4170	77312	M04040601	14901820