FICHA TÉCNICA

b.ativ foam border

ESPUMA DE POLIURETANO
COM INTERFACE ANTIADERENTE
COM REBORDO

by care
innovating for
a better care

www.by-care.pt

DESCRIÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIAS
7011205
7011206
7011208
7011209
7011210

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O penso de espuma com camada de contacto com a ferida (b.ativ foam border) tem uma construção de **camada tripla** que combina uma espuma hidrofílica de poliuretano absorvente entre uma camada de contacto com a ferida uniformemente perfurada não aderente e uma camada externa de película semipermeável, permitindo a transferência eficaz de vapor.

Pode ser utilizado como penso primário.

INDICAÇÕES

Os pensos b.ativ foam border são indicados para:

- feridas com exsudado baixo a moderado
- úlceras venosas,
- úlceras por pressão,
- úlceras do pé diabético,
- úlceras arteriais
- locais de doação,
- abrasões
- lacerações
- feridas cirúrgicas

O penso b.ativ foam border sacral é indicado para aplicação na região sacrococcígea.

CARATERISTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

- Camada externa protetora: poliuretano com adesivo acrílico
- Camada interna absorvente: espuma poliuretano hidrocelular
- Camada perfurada de contacto com a ferida: poliuretano

REFERÊNCIA	MODELO	DIMENSÕES / ÁREA ÚTIL
7011209	foam border	10 X 10 (5X5) CM
7011205	foam border	15 X 15 (10X10) CM
7011206	foam border	20 X 20 (15X15) CM
7011208	foam border sacral	22 X 22 (16X15) CM



...OUTRAS CARATERÍSTICAS

- Impermeável a fluídos e bactérias e com alta permeabilidade ao ar
- Biocompatibilidade (ISO 10993)
- Isento de látex
- Hipoalergénico
- Livre de partículas tóxicas e contaminantes
- Confortável e adaptável: película fina e maleável
- Utilização fácil e recortável
- Absorção vertical, sem extravasamento
- Retém o exsudado sem causar maceração da pele perilesional
- Mantém um ambiente húmido que auxilia no processo de cicatrização
- Remoção atraumática, sem deixar resíduos
- Impermeabilidade 500mm pressão hidrostática para 300s.
- Trasnparência da pelicula e coloração branca da espuma permite a monitorização do exsudado, guiandpo o profissional de saúde para a sua substituição

TESTES

	MÉTODO	RESULTADO
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL	AATCC TM197-2022	0,24 mm/s
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO LIVRE	EN 13726:2023	0,65 g/cm2
CAPACIDADE RETENÇÃO DE FLUIDO	EN 13726:2023	0,46 g/cm2
TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR DE ÁGUA (MVTR)	EN 13726:2023	750 g/m2/24h Camada externa: 820 g/m2/24h

PRAZO DE VALIDADE

3 ANOS

CLASSIFICAÇÃO CE

CLASSE IIb

ESTÉRIL/NÃO ESTÉRIL

ESTÉRIL

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO

ÓXIDO DE ETILENO

ENQUADRAMENTO LEGAL

Em conformidade com os requisitos legais do Regulamento dos Dispositivos Médicos 2017/745 - Classe IIb.

Simbologia utilizada:



Cumpre com a norma ISO 13726:2023 - Métodos de ensaio para pensos primários para feridas.

INSTRUÇÕES DE USO


1) Limpar a ferida de acordo com os procedimentos normais.
2) Selecionar o penso apropriado para que a espuma sobreponha as margens da ferida em aproximadamente 2 cm. Cortar o tamanho do penso se necessário.
3) Colocar o lado da espuma diretamente na superfície da ferida.
4) Seguir a numeração para remoção de película protetora: remover as películas número 2 apenas quando o apósito já tiver completamente fixado à pele.

Frequência de mudança:

- O penso tem a capacidade de permanecer no local até 7 dias ou até que o exsudado seja visível e se aproxime 2 cm da borda da espuma, o que ocorrer primeiro. Durante a fase inicial do tratamento da ferida, o produto deve ser inspecionado com frequência.

Remoção do penso:

- Para remover o penso b.ativ foam border, levantar um canto e puxar suavemente o penso de volta sobre si mesmo. Mantém a forma na remoção e remove-se numa peça única

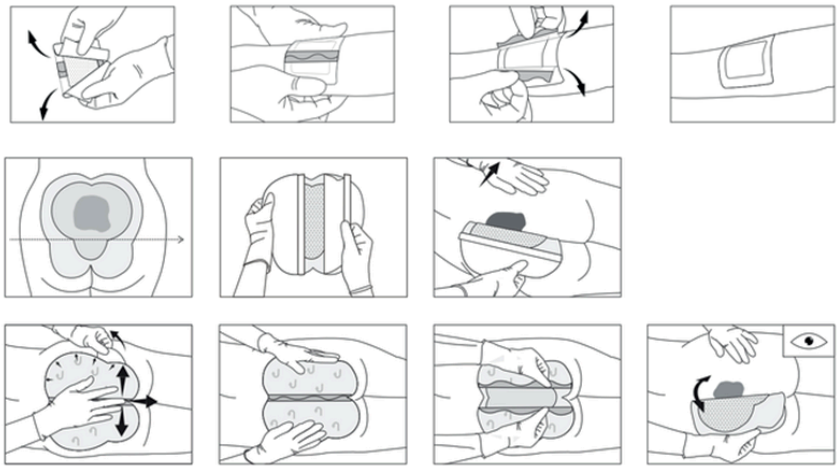

CONTRA-INDICAÇÕES

Não utilizar o produto em doentes com sensibilidade conhecida ao Adesivo Acrílico ou Poliuretano.

ADVERTÊNCIAS

1. Se não tiver certeza da gravidade da ferida ou condição, consultar um profissional de saúde antes do primeiro uso deste produto.
2. Em caso de sinais de infeção (por exemplo, dor ou inchaço excessivos), consultar um profissional de saúde para tratamento adequado da infeção.
3. Se ocorrer vermelhidão ou sensibilização, interromper a utilização do produto.
4. Não utilizar o produto com agentes oxidantes como peróxido de hidrogénio ou soluções de hipoclorito.
5. Produto de uso único. Se utilizado em mais do que um doente, pode ocorrer contaminação cruzada ou infeção. A abertura da embalagem do penso compromete a barreira estéril, portanto, qualquer penso não utilizado não deve ser retido para uso posterior.
6. O produto único não pode permanecer na ferida por mais de 7 dias.



APRESENTAÇÃO LOGÍSTICA

REF.	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA DISPENSADORA	CARTÃO
7011209	*1*	*10*	*100*
7011210	*1*	*10*	*100*
7011205	*1*	*10*	*100*
7011206	*1*	*10*	*100*
7011208	*1*	*5*	*50*

O PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO À TEMPERATURA AMBIENTE, EM LOCAL SECO E FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ SOLAR

Distribuidor: By Care, Lda

Fabricante: Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd