FICHA TÉCNICA

B.ATIV SILFOAM PLUS

ESPUMA DE POLIURETANO COM INTERFACE EM SILICONE COM REBORDO

by care
innovating for
a better care

www.by-care.pt

DESCRIÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIAS

7011270

7011271

7011272

7011273

7011275

7011276

7011277

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

As espumas silfoam plus permitem a gestão de exsudado,indicadas para uma ampla gama de feridas, tais como:

- Feridas exsudativas(exsudado moderado a elevado)
- Úlceras de pressão
- Úlceras nas pernas
- Úlceras de pé diabético
- Feridas traumáticas
- Feridas cirúrgicas
- Enxertos - local doador
- Abrasões
- Queimaduras 1º grau
- Queimaduras 2º grau
- Feridas secas/necróticas em combinação com géis
- **Podem ser utilizadas em terapia profilática para prevenção de úlceras de pressão - *Finite Element Analysis of the Biomechanical Protective Performance* - disponível sob consulta**

CLASSIFICAÇÃO CE

Classe IIb

ESTÉRIL/NÃO ESTÉRIL

ESTÉRIL

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO


ÓXIDO DE ETILENO

PRAZO DE VALIDADE

3 ANOS

CARATERISTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

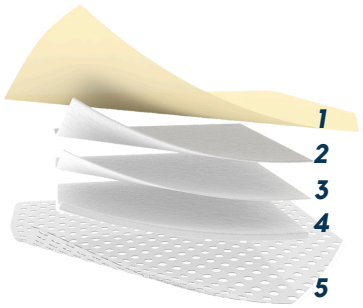

1. camada de filme de poliuretano permeável ao vapor e à prova de água
2. camada de fibras de poliacrilato superabsorvente
3. camada de distribuição não tecido
4. camada de espuma de poliuretano
5. camada de contato com a ferida de silicone macio

REFERÊNCIA	MODELO		DIMENSÕES/ÁREA ÚTIL
7011270	silfoam PLUS		10 X 10 CM (6,2 X 6,2)
7011271	silfoam PLUS		12,5 X 12,5 CM (8,5 X 8,5)
7011272	silfoam PLUS		15 X 15 CM (10,5 X 10,5)
7011273	silfoam PLUS		20 X 20CM (15 X 15)
7011275	silfoam PLUS sacral adequado para a região sacrococcígea		17,5 X 17 CM (12,5 X 12)
7011276			23 X 23 CM (17 X 16,5)
7011277	silfoam PLUS heel Penso adequado a múltiplas localizações anatómicas inclusivamente calcâneo		25 X 23,5CM (19 X 17,5)

Outras Propriedades

- Flexibilidade total (360º), graças aos seus cortes em T, uniformemente distribuídos, que permitem adaptabilidade aos contornos no corpo e movimentos do paciente
- Elasticidade testada no corpo do apósito e rebordo
- Interface em silicone de adesão suave,indicada para pele frágil, evita dor e trauma na remoção. Permite ser reposicionado sem perder aderência.



Outras Propriedades

- Elevada absorção vertical, sem extravasamento, que permite a visualização do exsudato
- Retém o exsudato, com o mínimo de deformação e sem causar maceração da pele perilesional
- Impermeável, resistente a bactérias e permeável ao ar
- Remove-se numa só peça, sem deixar resíduos
- Cria ambiente húmido, acelera a cicatrização da ferida
- Isento de látex
- Hipoalergénico
- Livre de partículas tóxicas e contaminantes

TESTES

	MÉTODO	RESULTADO
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL	AATCC TM197-2022	1,79 mm/s
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO LIVRE	EN 13726:2023	0,75 g/cm2
CAPACIDADE RETENÇÃO DE FLUIDO	EN 13726:2023	0,46 g/cm2
TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR DE ÁGUA (MVTR)	EN 13726:2023	1760 g/m2/24h Camada externa: 3010 g/m2/24h

ENQUADRAMENTO LEGAL

Em conformidade com os requisitos legais do Regulamento dos Dispositivos Médicos 2017/745 - Classe IIb.
Simbologia utilizada:




Cumpre com a norma ISO 13726:2023 - Métodos de ensaio para pensos primários para feridas.

INSTRUÇÕES DE USO

Limpar a ferida de acordo com os procedimentos normais. Secar bem a pele ao redor.

Remover a película de proteção e aplicar o lado aderente na ferida. Não esticar o produto.

Selecionar um tamanho/forma apropriado. O penso deve cobrir a pele circundante em pelo menos 1-2 cm nos tamanhos menores e 5 cm nos tamanhos maiores.

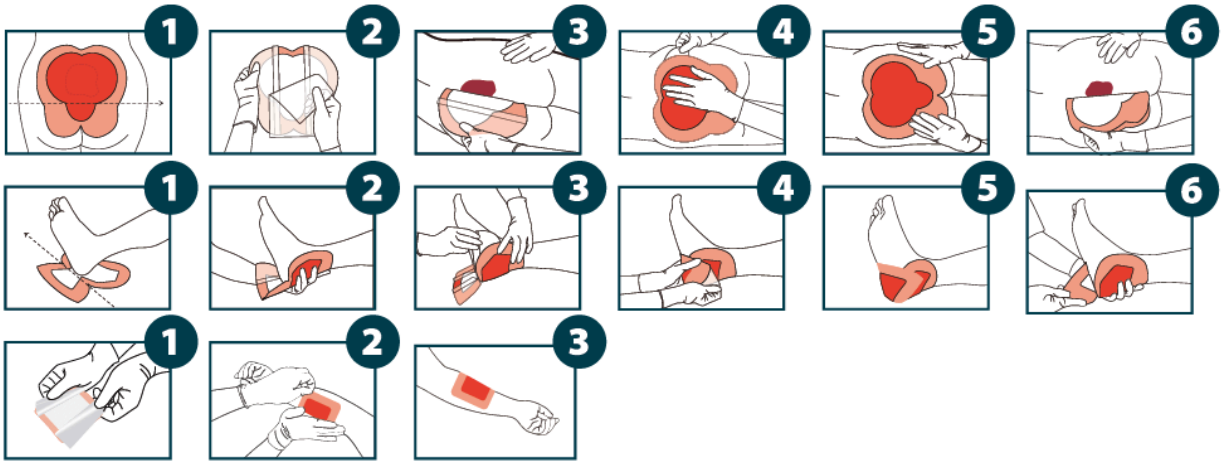

ADVERTÊNCIAS

- Não deve ser utilizado em pessoas com alergia ou hipersensibilidade conhecida ao penso ou aos seus componentes.
- Uso único. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.
- Não utilizar o produto silfoam juntamente com agentes oxidantes, como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogénio.
- Se ocorrer eritema ou sensibilização, interrompa a utilização do produto.

APRESENTAÇÃO LOGÍSTICA

REFERÊNCIA	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA DISPENSADORA	CARTÃO
7011270	1	10	100
7011271	1	10	100
7011272	1	10	100
7011273	1	10	100
7011275	1	10	100
7011276	1	5	50
7011277	1	5	50

O PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO À TEMPERATURA AMBIENTE, EM LOCAL SECO E FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ SOLAR

Distribuidor: By Care, Lda

Fabricante: Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd