
FICHA TÉCNICA

b.ativ hydrocel cmc


Penso de fibras gelificantes CMC

by care
innovating for
a better care

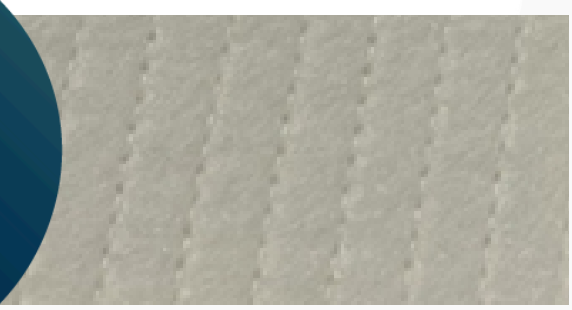

DESCRIÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIAS

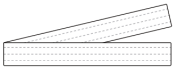REF.		DIMENSÕES
7011310		*5 X 5 CM*
7011311		*10 X 10 CM*
7011312		*15 X 15 CM*
7011313		*20 X 30 CM*
7011314		*2 X 45 CM*

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

O hydrocel CMC é um apósito adaptável e altamente absorvente, absorve o exsudato da ferida e cria um gel macio, mantém um ambiente húmido que auxilia no processo de cicatrização do corpo e auxilia na remoção de material desvitalizado da ferida (desbridamento autolítico), sem danificar o tecido recém-formado.

CARATERISTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

- Fibras de carboximetilcelulose sódica (CMC) e sutura de reforço

INDICAÇÕES

O apósito hydrocel cmc é utilizado para o tratamento de feridas agudas ou crónicas com exsudato moderado a intenso. Também pode ser pré-humedecido para uso eficaz em feridas secas ou com drenagem leve, incluindo:

- Úlceras na perna,
- Úlceras por pressão (estágio II-IV)
- Úlceras arteriais
- Úlceras de pé diabético;
- Feridas cirúrgicas
- Áreas doadoras
- Feridas cicatrização por intenção secundária
- Queimaduras de espessura parcial;
- Feridas traumáticas abrasões
- Feridas traumáticas:lacerações

- Feridas oncológicas com exsudado moderado ou intenso,
- Feridas Oncologicas superficiais ou profundas

Outras Propriedades

- Alta resistência à humidade e integridade estrutural: remove-se numa peça única
- Baixo risco de desprendimento de fibras e resíduos
- Remoção atraumática e sem dor
- Alta capacidade de absorção e de retenção: gestão eficaz do exsudato
- Mínima dispersão lateral: protege a pele circundante contra maceração
- Retém fluido e bactérias nocivas: previne o risco de contaminação cruzada durante a remoção
- Propriedades exclusivas anti-encolhimento: ajuda a manter a cobertura
- Adapta-se ao leito da ferida para minimizar espaços mortos onde bactérias e biofilme podem se alojar
- Recortável
- Isento de látex
- Hipoalergénico
- Livre de partículas tóxicas e contaminantes

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS

CLASSIFICAÇÃO CE

Classe IIb

ESTÉRIL/NÃO ESTÉRIL

ESTÉRIL

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO

RADIAÇÃO

TESTES	MÉTODO	RESULTADO
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO LIVRE	EN 13726:2023	0,21 g/cm2
CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE FLUIDO	EN 13726:2023	0,21 g/cm2
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SOB PRESSÃO 40mmHg	EN 13726:2023	0,14 g/cm2
CARACTERÍSTICAS DE DISPERSÃO DE PENSOS GELIFICANTES	EN 13726:2023	Sem dispersão

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes de aplicar o penso hydrocel CMC, limpe a área da ferida como apropriado.

2. Aplique o penso sobre a ferida e cubra com um curativo que retenha a humidade, como um penso de espuma, gaze ou outro apropriado. O penso hydrocel CMC deve se sobrepor a 1,0 cm sobre a pele ao redor da ferida.


3. Ao usar o penso em tira em feridas com cavidades profundas, preencha apenas 80% das feridas, pois a fita se expandirá para preencher o espaço da ferida em contato com o fluido da ferida.

4. Em áreas doadoras e queimaduras de 2º grau o penso pode ser deixado no local por até 14 dias.

5. Todas as feridas devem ser inspecionadas frequentemente. Remova o penso quando clinicamente indicado (por exemplo, vazamento, sangramento excessivo, suspeita de infecção).

6.O penso hydrocel CMC foi projetado para permanecer no local por no máximo 7 dias. O curativo deve ser trocado quando estiver saturado com fluido da ferida ou se o penso de cobertura vazar ou se as bordas do penso estiverem amassadas ou enroladas.

7. Ao usar o penso em feridas com baixos níveis de exsudado, humedeça-o com solução salina fisiológica estéril (0,9%) antes da troca. Qualquer resíduo de gel na ferida deve ser removido durante a limpeza da ferida. Feridas profundas, em particular, devem ser bem irrigadas.

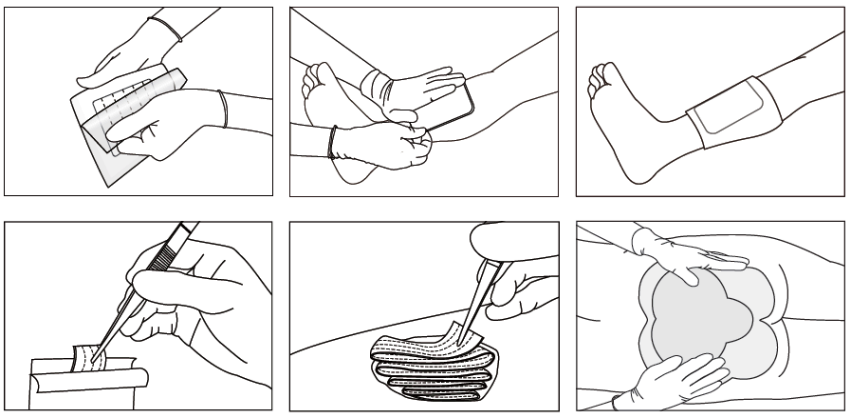

ADVERTÊNCIAS

- Pacientes com alergia à carboximetilcelulose sódica (CMC) devem evitar o uso deste produto.
- Em caso de edema ou eritema na ferida por mais de 48 horas após o uso, consulte um médico.
- Este produto é de uso único e é fornecido estéril.
- Descarte qualquer porção não utilizada do produto após o tratamento.
- Se a embalagem interna estiver danificada, não utilize.

ENQUADRAMENTO LEGAL

Em conformidade com os requisitos legais da Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42 - Classe IIb.
Cumpre com a norma ISO 13726:2023 - Métodos de ensaio para pensos primários para feridas.

APRESENTAÇÃO LOGÍSTICA

REF.	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA DISPENSADORA	CARTÃO
7011310	1	10	800
7011311	1	10	400
7011312	1	10	200
7011313	1	10	50
7011314	1	5	200

O PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO À TEMPERATURA AMBIENTE, EM LOCAL SECO E FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ SOLAR

Distribuidor: By Care, Lda

Fabricante: Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd