KVTECH PORTUGAL, Lda.
Av. Duque de Loule, 106 – Piso 4
1050-093 Lisboa
Portugal
convatec.pt

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

FOAM LITE CONVATEC™

Penso de espuma com adesivo de silicone perfurado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Foam Lite ConvaTec™ é um penso fino, confortável, composto por uma camada de poliuretano resistênte à água, e uma espuma absorvente com um adesivo de silicone suave perfurado.

A película da camada externa forma uma barreira impermeável, antiviral e antibacteriana, que protege a lesão de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. A utilização do penso não garante nem assegura a ausência de transmissão do vírus da SIDA ou do vírus da Hepatite.

A superficie de contacto com o leito da ferida está coberta por uma camada suave de silicone perfurado, suave e agradável para a pele, fácil de aplicar e reposicionar, e desenvolvido para minimizar o trauma da lesão e da pele perilesional na altura da sua remoção.


Os pensos Foam Lite ConvaTec™ foram desenvolvidos para feridas com pouco exsudado, e ajudam a manter um ambiente húmido no leito da ferida propício ao processo de cicatrização. Foam Lite ConvaTec™ mantém-se aplicado sem a necessidade de penso secundário. Os pensos Foam Lite ConvaTec™ podem ser reposicionados após a sua aplicação.

Os pensos Foam Lite ConvaTec™ podem ser cortados na forma e tamanho indicado pelo profissional de saúde. Se o penso for cortado, será necessário uma fixação adicional para o manter aplicado. Se cortar o penso, a barreira antibacteriana/antiviral proporcionada pelo penso pode ficar comprometida.

ESTRUTURA / COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

Foam Lite ConvaTec™ é um penso estéril constituído por 3 camadas:

- Camada externa de poliuretano suave
- Espuma absorvente de poliuretano

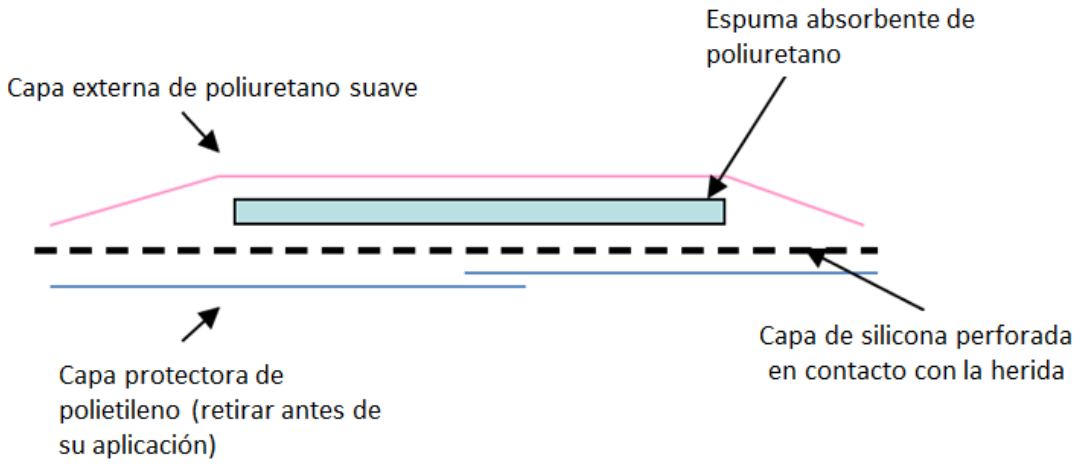

1) Uma camada de poliuretano suave ao tacto, que actua como barreira protectora contra bactérias e virus†. Esta camada é composta por uma película de poliuretano, que permite a evaporação do excesso do exsudado, e actua como barreira impermeável que protege a lesão de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção.

2) Camada de espuma fina, flexível e suave desenhada para absorver níveis de exsudado ligeiros e ajudar a manter un ambiente húmido propício para a cicatrização†[1]

3) Camada de silicone adesivo perfurado, suave e agradável para a pele, fácil de aplicar, reposicionar[1] e atraumática para a lesão e para a pele perilesional na altura da sua remoção†[2] . A sua adesividade é suave para a pele, mantendo o penso no lugar sem necessidade de utilizar um penso secundário. Esta camada tem um baixo potencial de irritação dérmica comprovado.



Este penso não contém látex.

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade de absorção: 0,25 g/cm2
- Capacidade de retenção: 0,16 g/cm2 (63,2%
- Capacidade total de gestão de exsudado (24hrs): 21,32 g/10 cm2
    - transmissão de vapor de água: 18,53 g/10cm2
    - fluido absorvido: 2,79 g/10cm2

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

- Flexível e adaptável[†1]
- Suave, com uma camada externa resistente à água[†1] que proporciona uma barreira contra bactérias e vírus [†1]
- Pode ser cortado[*]
- Silicone perfurado em contacto com a ferida, que também proporciona uma adesão suave à pele perilesional.
- Não cola às luvas[†], e permite que o penso seja reposicionado após a sua aplicação.
- Este penso está indicado para exsudados ligeiros, graças à sua espuma absorvente e às propriedades de transmissão de vapor de água da camada mais externa.
- Fácil de aplicar, reposicionar e remover [†1,2]
- Pode permanecer aplicado até um máximo de 7 dias.

convatec
— forever caring —

INDICAÇÕES

Os pensos Foam Lite ConvaTec™ podem ser utilizados para o tratamento de feridas crónicas e agudas, tais como:

- Úlceras vasculares, úlceras por pressão (grau II-IV) e úlceras de pé diabético;

- Feridas cirúrgicas (pós-cirúrgicas, zonas dadoras, dermatológicas);

- Queimaduras de espessura parcial (segundo grau);

- Feridas traumáticas ou cirúrgicas que cicatrizam por segunda intenção, tais como deiscências de incisões cirúrgicas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Os pensos Foam Lite ConvaTec™ não devem ser utilizados em indivíduos com sensibilidade ou que já fizeram reação alérgica ao penso ou aos seus componentes.

Os pensos Foam Lite ConvaTec™ não são compatíveis com produtos oleosos ou emolientes como a vaselina.

Não utilize os pensos Foam Lite ConvaTec™ com agentes oxidantes como o peróxido de hidrógenio ou soluções de hipoclorito.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Se a embalagem primária do produto estéril estiver danificada, não se deve utilizar.

2. Preparação e limpeza do leito da ferida:

- Antes de aplicar o penso, limpar o leito da ferida com uma solução de limpeza adequada, e secar a pele perilesional.

- Assegure-se de que a pele perilesional não contém emolientes nem productos oleosos, pois podem afectar a aderência do penso.

3. Preparação e aplicação do penso

- Seleccionar a forma e tamanho adequado do penso, garantido que a almofada central absorvente (a zona do penso no interior da janela de adesivo) é 1cm maior que a área da ferida.
- Retirar o penso da embalagem estéril, minimizando o contacto dos dedos com a superficie de contacto com a ferida e a superfície adesiva. Retirar o papel protector, se estiver a utilizar o penso adesivo.
- O penso pode ser cortado como for mais adequado.
- Manter o penso sobre a lesão e alinhar o centro do penso com o centro da lesão. Aplicar a almofada directamente sobre a ferida. No penso aderente, alise o rebordo aderente.
- Se estiver a utilizar o penso não aderente, ou se tiver cortado o penso com rebordo aderente, deve ser utilizada uma ligadura ou adesivo para manter o penso correctamente aplicado.

4. Remoção do penso

- O penso deve ser mudado quando clínicamente indicado (por exemplo: fugas, sangramento, aumento da dor, suspeita de infecção). O tempo máximo recomendado de utilização do penso é de 7 dias.
- Para retirar o penso, pressionar suavemente a pele, e com cuidado retirar o penso a partir de um dos cantos. Continuar até que todos os cantos estejam descolados. Cuidadosamente, levantar o penso e descatar de acordó com os protocolos clínicos locais.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Armazenar à temperatura ambiente (10°C – 25°C/50° F - 77° F). Proteger da luz. Manter num lugar seco.

convatec
— forever caring —

MISCELÂNEA

O penso Foam Lite ConvaTec™ está autorizado para comercialização em toda a Europa com a marca CE, de acordo com a Directiva Comunitária 93/42/CEE, que regula os produtos sanitários no âmbito europeo.

PRAZO DE VALIDADE

O penso Foam Lite ConvaTec™ tem um período de validade de 2 anos.

APRESENTAÇÕES

APRESENTAÇÕES	Dimensões(cm)	Dimensões área útil (cm)	Unids. / emb.	REF	CNP	CDM
Penso estéril	5x5	2,5x2,5	10	421927	6321521	52036324
Penso estéril	10x10	6,5x6,5	10	421559	6321547	22545670
Penso estéril	15x15	11x11	10	421561	6321554	49660454
Penso estéril	5,5x12	2,5x9,5	10	421563	6321562	50848151

†Como se demonstrou in vitro

*Por favor, consulte o folheto informativo do penso Foam Lite ConvaTec™ para ver as instruções completas de utilização.

convatec
— forever caring —

Bibliografia:

1.In Vitro Performance Characteristics of Foam Lite ConvaTec WHRI 4680 MS132. 25/04/16 Data on File, ConvaTec Inc.
2.Meuleneire F, Rücknagel H. Soft silicones Made Easy. Wounds International 2013 (May). Available from: www.woundsinternational.com

ConvaTec Limited,

Deeside, UK

®/™ são marcas de ConvaTec, Inc.

©2022

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.
Avenida Duque de Loule, 106 – Piso 4,
1050-093 Lisboa, Portugal
Tel: 707 201 187
email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa
NICP: 508671531 | Capital social: 5.000,00 Euros.

convatec
— forever caring —